

Thanks! Fair 2018 専用FAX注文書

下記の表をご参照のうえ、必要事項を全てご記入いただき、代理店にお渡しください。

ご注文 (FAX番号) **048-837-5581**



製品名	製品コード	価格	数量
ニチベット EX II	00-NPX2-2	21,000円	
	00-NPX2-10	21,000円	
	00-NPX2-20	18,900円	
	00-NPX2-100	18,900円	
	00-NPX2-200	18,900円	
	00-NPX2-1000	18,900円	
	00-NPX2-5000	21,000円	
	00-NPX2-10000	25,900円	
ニチベット EX Plus II	00-NPLO2-2	26,600円	
	00-NPLO2-10	26,600円	
	00-NPLO2-20	23,800円	
	00-NPLO2-100	23,800円	
	00-NPLO2-200	23,800円	
	00-NPLO2-1000	23,800円	
	00-NPLO2-5000	28,000円	
	00-NPLO2-10000	33,600円	
ニチベット EX II MULTI	00-NPM-8VP	49,400円	
	00-NPM-8SP	49,400円	
	00-NPM-8LP	49,400円	
	00-NPM-8KP	49,400円	
	00-NPM-12VP	64,350円	
	00-NPM-12SP	64,350円	
	00-NPM-12LP	64,350円	
	00-NPM-12KP	64,350円	
バリデーション サービス	N-1M8	4,000円	
	N-1M12	6,000円	
	J-3M8	13,000円	
	J-3M12	19,500円	
ニチベット スタンド MLT-STD II	00-MLT-STD2	プレゼント	

※NPX,NPLO2,NPMを合計3本以上ご購入の方は「1」とご記入ください。

製品名	製品コード	価格	数量	
ニチベット プレミアム	00-NPP-2	33,000円		
	00-NPP-10	33,000円		
	00-NPP-20	30,000円		
	00-NPP-100	30,000円		
	00-NPP-200	30,000円		
	00-NPP-1000	30,000円		
	00-NPP-5000	35,000円		
	00-NPP-10000	40,000円		
	ニチベット プレミアム LT ピンク	00-NLT-2	34,000円	
		00-NLT-10	34,000円	
00-NLT-20		31,000円		
00-NLT-100		31,000円		
00-NLT-200		31,000円		
00-NLT-1000		31,000円		
ニチベット プレミアム LT ライムグリーン		00-NLT-2	34,000円	
		00-NLT-10	34,000円	
	00-NLT-20	31,000円		
	00-NLT-100	31,000円		
	00-NLT-200	31,000円		
	00-NLT-1000	31,000円		
	ニチリョー Le	00-NLE-10	9,900円	
		00-NLE-20	9,900円	
00-NLE-100		9,900円		
00-NLE-200		9,900円		
ニチリョー Neo	00-NLE-1000	9,900円		
	00-NLE-2000	9,900円		
	00-NLE-5000	9,900円		
	00-NLE-10000	9,900円		
ニチベット メイト NEO	00-PMNEO	27,300円		
DISPET EX II	00-DPX2-20	32,900円		
	00-DPX2-50	32,900円		
	00-DPX2-100	32,900円		
	00-DPX2-250	41,300円		
	00-DPX2-500	49,000円		
	00-DPX2-1000	57,400円		

・上記製品のみキャンペーン対象となります。 ・表示価格に消費税は含まれておりません。キャンペーン品につき返品はご遠慮ください。

※印 (ニチベットプレミアム) のドリームバンク会員限定製品をご購入の方は、DB会員No.をご記入ください。

依頼者情報 *必須記入項目	
施設名*	
住所	
お名前*	DB会員 No.
E-mail*	TEL*

代理店

●個人情報詳細につきましては(株)ニチリョーホームページをご参照ください。
●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

株式会社 **ニチリョー**

<http://www.nichiryo.co.jp/>

☎ 0120-66-9199 (営業業務課/直通)

✉ info@nichiryo.co.jp

越谷本社工場
〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760-1
TEL 048-989-1301 FAX 048-989-1333

東京営業本部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-10-1 サクラビル3F
TEL 03-6273-7651 FAX 03-6273-7944

大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館10F
TEL 06-6391-1057 FAX 06-6391-1058

浦和事業所
〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷5-5-11
TEL 048-793-7071 FAX 048-837-5581

九州サービスセンター
〒813-0034 福岡県福岡市東区多々津4-14-20
TEL 092-629-8164 FAX 092-622-0166

サービス&サポート
(株)サイメック 越谷本社工場内
TEL:048-986-0797 FAX:048-986-0798

Thanks! Fair 2018

2017.11.6 月
~2018.2.28 水

対象製品を3本以上購入で
ニチベットスタンド MLT-STD2
プレゼント!

30% off

オートクレーパブルマイクロピペット
Nichipet EX II P.2
ベストセラーモデル

対象製品を3本以上購入で
ニチベットスタンド MLT-STD2
プレゼント!

30% off

オートクレーパブルマイクロピペット
Nichipet EX Plus II P.3
有機溶媒に対応!

バリデーションサービスが
半額!

対象製品を3本以上購入で
ニチベットスタンド MLT-STD2
プレゼント!

35% off

オートクレーパブルマルチチャンネルピペット
Nichipet EX II MULTI P.4
マルチチャンネル軽量化モデル

3本以上購入で
point プレゼント

オートクレーパブルマイクロピペット
Nichipet Premium Nichipet Premium LT P.5
ドリームバンク会員様限定

40% off

エルゴノミックマイクロピペット
NICHIRYO Le P.6

35% off

ピペットコントローラ
Pipette Mate NEO P.6

30% off

オートクレーパブルポルトトップディスペンサー
DISPET EX II P.6

2017.12.1 金 ~ **30% off**

小型卓上遠心機
Nichimate Flush P.7

2017.12.1 金 ~ **最大 35% off**

ボルテックスミキサー
Nichimate Mix 販売終了 P.7

遠沈管(滅菌済み) **最大 63% off**

Centrifuge Tube P.8
マイクロチューブ

エコノミーフィルターチップ **最大約 40% off**

Economy Filter Tip P.8

NEW **50% off**

ラック P.9

大箱購入で新ラック **最大 40% off**

エコノミーチップ **10個** プレゼント

Economy Tip P.9

Nichipet EX II
Nichipet EX Plus II
Nichipet EX II MULTI

いずれかを3本以上ご購入の方へ
ビペットスタンドMLT-STD2をプレゼント!

※組み合わせは自由※ビペット本体は含まれません※専門注文書1枚につき1台



30% off

オートクレーパブルマイクロビペット

Nichipet EX II

UV
Resistance
121°C
20min
Autoclavable
ドリームポイント
1 point
日本製

ニチペットシリーズベストセラーモデル。
本体丸ごとオートクレーブ滅菌UV照射が可能。

ハイパーブローシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。
(数μL吸引時のチップ内液残りを解消。※2、10μLタイプに搭載)




ガラス製のカウンター窓

UV照射により曇りやすいカウンター窓もガラス製のため劣化せず、クリーンベンチ内での長期保管が可能。




ボディ

- 落下耐久性に優れた材質を採用。
- 耐薬品性に優れた堅牢ボディ。
- 本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。ノングリスのため、連続オートクレーブ処理が可能。

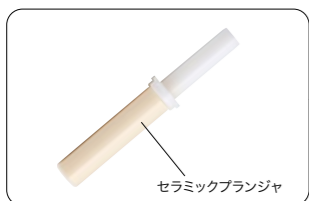

プランジャ

錆びないセラミックプランジャを採用。
(200μL~10000μL機種対応)

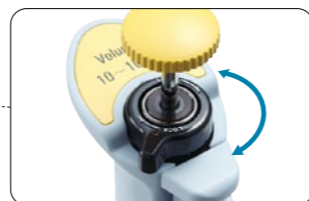

ロック機能

ビペッティング操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。ロック解除で容量設定もスムーズ。



エジェクタ止めネジ

エジェクタパイプは止めネジ付きのため何度でも取り外し可能。



エジェクタパイプ

耐薬品性を高めるため、金属ではなく樹脂製を採用。

※1000μLタイプ以上のモデルには、本体への吸い込みをやわらげるノズルフィルターを採用。

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX2-2	可変式	0.1~2	*~±3.0	*~±1.0	30,000円	21,000円
00-NPX2-10		0.5~10	*~±1.0	*~±0.5		
00-NPX2-20		2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4		
00-NPX2-100		10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3	27,000円	18,900円
00-NPX2-200		20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2		
00-NPX2-1000		100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2		
00-NPX2-5000		1000~5000	±1.0~±0.6	±0.3~±0.2		
00-NPX2-10000		1000~10000	±2.0~±0.4	±0.4~±0.2	37,000円	25,900円

※NPX2-2での0.2μL以下及びNPX2-10での1μL以下の精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

Nichipet EX II
Nichipet EX Plus II
Nichipet EX II MULTI

いずれかを3本以上ご購入の方へ
ビペットスタンドMLT-STD2をプレゼント!

※組み合わせは自由※ビペット本体は含まれません※専門注文書1枚につき1台



30% off

オートクレーパブルマイクロビペット

Nichipet EX Plus II

UV
Resistance
121°C
20min
Autoclavable
ドリームポイント
1 point
日本製

耐薬品性に優れた有機溶媒、耐酸性対応モデル。

酸に強く、体積膨張率の小さい素材などを内部部品に採用しているため、耐薬品性に優れています。



プランジャ

錆びないセラミックプランジャを採用。
(20μL~10000μL機種対応)



一段バネ

溶剤への耐久性を高めるため腐食し難い特殊合金を使用。



Oリング

酸に強く、揮発ガスへの体積膨張率の小さいパーフロゴム製Oリング。

Point 錆びに強く、長持ち!

Nichipet EX Plus II
従来品



エジェクタパイプ

耐薬品性を高めるため、金属ではなく樹脂製を採用。

※1000μLタイプ以上のモデルには、本体への吸い込みをやわらげるノズルフィルターを採用。

【パーフロゴム製Oリング耐薬品性/対応表】

薬品名称	薬品温度	試験日数	パーフロゴム	従来のフッ素ゴム	薬品名称	薬品温度	試験日数	パーフロゴム	従来のフッ素ゴム		
鉱酸・有機酸	氷酢酸	40°C	21	A	C	アルコール類	メチルアルコール	40°C	21	A	B
無機アルカリ類	アンモニア水 28%	40°C	21	A	D	エチルアルコール	40°C	21	A	B	
フラン・アルデヒド類	アセトアルデヒド	25°C	21	B	D	その他 油・スチム類	ファイアークエル	130°C	11	A	B
含窒素化合物類	N, N' - ジメチルホルムアミド	40°C	21	A	D	アセトン	40°C	21	B	D	
炭化水素・ハロゲン化炭化水素類	クロロホルム	40°C	21	B	B	ケトン・エステル・エーテル類	ジエチルエーテル	25°C	21	B	C

※その他の耐薬品性につきましては弊社ホームページをご覧ください。

A: 体積膨張率 5%未満 …… 使用上全く問題なし C: 体積膨張率 20% - 50% …… 使用は条件付き
B: 体積膨張率 5% - 20% …… 使用上問題なし D: 体積膨張率 50%以上 …… 使用不可

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPLO2-2	可変式	0.1~2	*~±3.0	*~±1.0	38,000円	26,600円
00-NPLO2-10		0.5~10	*~±1.0	*~±0.5		
00-NPLO2-20		2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4		
00-NPLO2-100		10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3	34,000円	23,800円
00-NPLO2-200		20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2		
00-NPLO2-1000		100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2		
00-NPLO2-5000		1000~5000	±1.0~±0.6	±0.3~±0.2		
00-NPLO2-10000		1000~10000	±2.0~±0.4	±0.4~±0.2	48,000円	33,600円

※NPLO2-2での0.2μL以下及びNPLO2-10での1μL以下の精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

Nichipet EX II
Nichipet EX Plus II
Nichipet EX II MULTI

いずれかを3本以上ご購入の方へ
ピペットスタンドMLT-STD2をプレゼント!

※組み合わせは自由※ピペット本体は含まれません※専門注文書1枚につき1台

本体
ご購入で

バリデーション
サービスが
半額!

35%
off

オートクレーパブルマルチチャンネルピペット

Nichipet EX II MULTI

UV Resistance 121°C 20min AutoLevel 12ch 3point 日本製

マルチチャンネルピペットに、本体重量軽量化モデルが登場。



ロック機能

ピペッティング操作中に容量ずれが
起こらないロック機能付き。
ロック解除で容量設定もスムーズ。



ノズル

チップ装着時のバラツキを抑える
ノズル設計。



8ch

12ch



エジェクタ

チップエジェクト荷重を軽減。
ワンハンドエジェクトによる操作が可能。



ボディ

- 落下耐久性に優れた材質を採用。
- 耐薬品性に優れた堅牢ボディ。
- 本体重量を最大30%軽量化。(当社比)
- メンテナンス性に優れた新機構を採用。
- ※本体丸ごとオートクレーパ滅菌可能。

製品コード	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPM-8VP	8	可変式	0.5~10	*~±2.0	*~±1.0	76,000円	49,400円
00-NPM-8SP			5~100	*~±0.8	*~±0.3		
00-NPM-8LP			20~200	±3.0~±0.9	±0.6~±0.3		
00-NPM-8KP			30~300	±3.0~±0.6	±1.0~±0.3		
00-NPM-12VP	12	可変式	0.5~10	*~±2.0	*~±1.0	99,000円	64,350円
00-NPM-12SP			5~100	*~±0.8	*~±0.3		
00-NPM-12LP			20~200	±3.0~±0.9	±0.6~±0.3		
00-NPM-12KP			30~300	±3.0~±0.6	±1.0~±0.3		

※NPM-8VP、12VPでの1μL以下及びNPM-8SP、12SPでの10μL以下の精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。



バリデーションサービス

サービスコード	チャンネル数	調整後検定	発行書類		合否判定	測定回数	検定容量	料金	キャンペーン価格
			JCSS校正証明書	検査成績書					
N-1M8	8	○	○	○	○	6回	表示容量範囲の最大値、最小値(又は10%)	8,000円	4,000円
N-1M12	12	○	○	○	○	6回	表示容量範囲の最大値、最小値(又は10%)	12,000円	6,000円
J-3M8	8	○	○	○	○	10回	表示容量範囲の最大値、50%及び最小値(又は10%)	26,000円	13,000円
J-3M12	12	○	○	○	○	10回	表示容量範囲の最大値、50%及び最小値(又は10%)	39,000円	19,500円

※JCSS校正サービスは、JCSSで登録された「ニチヨー校正サービスセンター」で実施されます。※8VP、12VPは、3チャンネル測定となります。詳細はお問い合わせください。
※キャンペーンで、Nichipet EX II MULTI本体をご購入いただいた方に限ります。

オートクレーパブルマイクロピペット

Nichipet Premium Nichipet Premium LT

5年保証つきプレミアムモデル。
ストローク荷重軽減モデルLT登場。

UV Resistance 121°C 20min AutoLevel 1point 日本製 5年間保証

ドリームバンク
会員様 限定

3本以上で
お得!



ライムグリーン
限定発売!



ストローク荷重


ニチヨー最軽量の荷重。
※当社比で最大70%軽減。



共通

ハイパープロアシシステム

吐出性能が格段に向上。
数μL吸引時のチップ内液残りを解消。
(2、10μL機種対応)

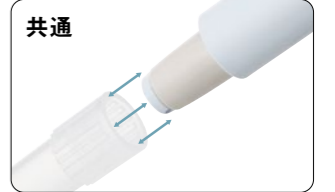

共通

ノズル

チップ着脱時の摩擦に
強い高耐久ノズルを採用。
※Nichipet Premium LT
100~1000μLに、ノズルフィルターは
ついておりません。

3本以上ご購入で /

3 point ~

+

プレゼント

15 point

=

合計

18 point ~

ポイント交換例

対象製品3本ご購入で

16point ニチベットプレミアムLT 1本 または ニチベットプレミアム 1本

※その他の製品のポイント交換数など、詳しくは弊社WEBサイトをご確認ください。※ライムグリーンはポイント交換できません。

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	プレゼント				
ニチベットプレミアム	可変式	00-NPP-2	0.1~2	*~±3.0	*~±1.0	33,000円	3本以上購入で 15ポイント			
		00-NPP-10	0.5~10	±4.0~±1.0	±3.0~±0.5					
		00-NPP-20	2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4					
		00-NPP-100	10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3					
		00-NPP-200	20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2					
		00-NPP-1000	100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2					
		00-NPP-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	±0.3~±0.2					
		00-NPP-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	±0.4~±0.2					
		ピペットプレミアム	可変式	00-NLT-2	0.1~2			*~±3.0	*~±1.0	34,000円
				00-NLT-10	0.5~10			±4.0~±1.0	±3.0~±0.5	
00-NLT-20	2~20			±5.0~±1.0	±3.0~±0.4					
00-NLT-100	10~100			±2.0~±0.8	±1.0~±0.3					
00-NLT-200	20~200			±1.0~±0.8	±0.5~±0.2					
00-NLT-1000	100~1000			±1.0~±0.7	±0.5~±0.2					

※ドリームポイントの加算はご注文後、数週間いただく場合がございます。 ※対象製品(NPP,NLT)の組み合わせ本数は問いません。
※ライムグリーンは数量限定生産のため、在庫に限りがございます。 ※ライムグリーンは、チラシのイメージ色と実際の色とは異なる場合がございます。 ※ライムグリーンは、数量限定生産のため、修理などでボディを取り替える場合には選べません。



エルゴノミックマイクロピペット

NICHIRYO Le

ドリームポイント
1 point

日本製

40% off

学生実習に最適モデル。
お手軽価格のスターターピペット。

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	可変式	0.5~10	*~±1.2	*~≤0.8	16,500円	9,900円
00-NLE-20		2~20	±5.0~±1.2	≤3.0~≤0.8		
00-NLE-100		10~100	±2.0~±1.0	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-200		20~200	±1.2~±0.8	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-1000		100~1000	±1.2~±0.7	≤0.8~≤0.5		

※NLE-10での0.5μLでの精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。



ピペットコントローラ

Pipette Mate NEO

UV
Resistance

ドリームポイント
1 point

35% off

UV照射対応のピペットコントローラ。

軽量(167g)で操作性に優れ、クリーンベンチ内での作業にも適しています。
スタンドを必要としない自立型です。
長寿命のリチウム電池を採用しています。

製品コード	品名	充電アダプタ	フィルター	使用可能ピペット	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMNEO	ピペットメイト NEO	入力電圧 AC100/240V 50/60Hz	20mm 0.2μm (疎水性)	ガラス・ *プラスチック製 (1~100mL)	42,000円	27,300円



オートクレーパブルボトルトップディスペンサー

DISPET EX II

121°C
20min
AutoAwake
ドリームポイント
1 point

30% off

各種標準試薬瓶にセット可能なボトルトップディスペンサー。

長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。

製品コード	分注容量(mL)	目盛単位(mL)	精度(%)	再現性(%)	本体ねじ口	付属アダプタ サイズ	希望小売価格	キャンペーン価格
00-DPX2-20	0.2~2.0	0.05	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28 GL-32 GL-38	47,000円	32,900円
00-DPX2-50	0.5~5.0	0.10	±0.5	≤0.1				
00-DPX2-100	1.0~10.0	0.2	±0.5	≤0.1				
00-DPX2-250	2.5~25.0	0.5	±0.5	≤0.1				
00-DPX2-500	5.0~50.0	1	±0.5	≤0.1				
00-DPX2-1000	10.0~100.0	2	±0.5	≤0.1				

※DISPET EXIIにはボトルは含まれておりません。

小型卓上遠心機

Nichimate Flush

30% off

蓋の開閉操作だけで、
ON/OFFのコントロールが可能。

0.2mL PCRチューブ用ローターは本体底面に収納できます。
スペースを取らないコンパクト設計。

ワンタッチで
らくらく交換!



0.2mL PCRチューブ用ローター

- 【仕様】
- ・サイズ: 11.4×15×11.4cm (W×D×H)
 - ・重量: 1kg
 - ・電源: 100-240V、50/60Hz
 - ・収納サイズ:
1.5/2.0mL チューブ×8本
0.2mL 8連チューブ×4本
0.2mL シングルチューブ×32本

製品コード	品名	最大回転数	最大遠心力	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	ニチメイトフラッシュ	6,000 rpm	2,000 RCF(g)	39,800円	27,860円

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer

**最大
35% off**

パワフルな運転でムラなくミキシング。
コンパクトなシンプル設計。

連続運転、またはタッチスタートの切替が可能。
ニチメイトミキサー用フラットホームを別途購入で
複数の試験管やフラスコなどのミキシングが行えます。
底面は吸盤付のため、高速運転時も安定し実験台に振動を伝えません。

販売終了

- 【仕様】
- ・サイズ: 13×16×17cm (W×D×H)
 - ・重量: 3.8kg
 - ・電源: 115V、60Hz、180W

フラットホーム
(別売)



製品コード	品名	回転範囲	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX	ニチメイトミキサー	200~3200 rpm	39,800円	25,870円

製品コード	品名	直径	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX-F	フラットホーム	7.5 cm	4,800円	3,840円


遠沈管(滅菌済み)

Centrifuge Tube



最大遠心強度20000Gの高耐久モデル。

耐熱性・耐寒性に優れ、オートクレーブやディープフリーズも可能です。

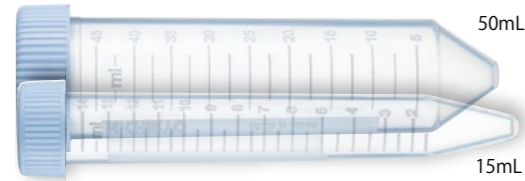

- 【仕様】
- ・材質(本体):ポリプロピレン
(キャップ):高密度ポリエチレン
 - ・耐遠心強度:20000G
 - ・サイズ:15mL/φ17×118mm
50mL/φ30×114mm
 - ・耐熱温度:-80~+121°C
 - ・電子線滅菌済
 - ・書き込みスペース付き
(キャップ上部、チューブ側面)

製品コード	パッケージ	容量範囲(mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
遠沈管	滅菌済み	15	400本(50本×8袋)	10,000円	6,500円(16.25円)
	バルク	50	200本(20本×10袋)	8,000円	4,520円(22.60円)

マイクロチューブ

Micro Tube



片手操作時のコンタミネーションリスクを低減。



- 【仕様】
- ・材質:ポリプロピレン
 - ・耐遠心強度:20000G
 - ・目盛:1.5mLタイプ/0.1・0.5・1.0・1.5mL
2.0mLタイプ/0.5・1.0・1.5・2.0mL
 - ・全長(フタ含まず):1.5mL/35.5mm
2.0mL/39.8mm
 - ・全体最大胴径:約φ10.8mm
 - ・書き込みスペース付き
(キャップ上部、チューブ側面)

製品コード	パッケージ	容量範囲(mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
マイクロチューブ	滅菌済み	1.5	1,000個	4,000円	1,460円(1.46円)
	バルク	2.0	1,000個	4,500円	1,980円(1.98円)

エコノミーフィルターチップ

Economy Filter Tip



高品質樹脂の使用で液切れを抜群に上げた新しいフィルターチップ。



シリーズ	製品コード	容量範囲(μL)	パッケージ	入数	適合機種	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
UT	00-ETS-FUTRB	0.1~10	滅菌済みラックチップ	96本 10ラック	●NPP-2, 10 ●NPX-NPX2-2, 10 ●NPL0-NPLO2-2, 10 ●NLT-2, 10 ●NLE-10 ●NP7-8V, 12V ●NPM-8VP, 12VP	13,000円	7,960円(8.30円)
SS	00-ETS-FSSRB	0.5~10		96本 10ラック	●NPP-10 ●NPX-NPX2-10 ●NPL0-NPLO2-10 ●NLT-10 ●NLE-10		
SG	00-ETS-FSGRB	1~40		96本 10ラック	●NPP-20 ●NPX-NPX2-20 ●NPL0-NPLO2-20 ●NLT-20 ●NLE-20 ●NPF2-20, 25 ●NP7-8S, 12S		
SE	00-ETS-FSERB	1~100		96本 10ラック	●NPX-NPX2-100 ●NPL0-NPLO2-100 ●NLE-100 ●NPM-8SR, 12SP		
AG	00-ETS-FAGRB	1~200		96本 10ラック	●NPP-200 ●NPX2-200 ●NPL02-200 ●NLT-200 ●NLE-200 ●NP7-8L, 12L ●NPM-8LP, 12LP		
K	00-ETS-FKRB	1~300		96本 10ラック	●NPP-200 ●NPX2-200 ●NPL02-200 ●NLT-200 ●NLE-200 ●NPM-8LP, 8KP, 12LP, 12KP		
LG	00-ETS-FLGRB	100~1000		96本 6ラック	●NPP-1000 ●NPX-NPX2-1000 ●NPL0-NPLO2-1000 ●NLT-1000 ●NLE-1000		

最大約
40% off

NEW

ラック



本体と蓋部分にポリカーボネート(PC)を採用。対薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌のリPEATも可能。



50% off

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-ETS-10UTRK	ラックのみ	0.1~10	5ラック	5,500円	2,750円
00-ETS-200SGRK		2~200			
00-ETS-1000LGRK		100~1000			

エコノミーチップ

Economy Tip



高品質樹脂の使用で液切れを抜群に上げたチップ。オートクレーブ滅菌も可能。



最大
40% off

大箱購入で
新ラック10個
プレゼント

10μLエコノミーチップ




製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-ETS-UT	バルク	0.1~10	1,000本	2,300円	1,420円(1.42円)
00-ETS-UT10			10,000本(1,000本×10)	20,000円	13,180円(1.32円)
00-ETS-JUTW	リフィルチップ	0.1~10	960本(96本×10段)	4,600円	3,300円(3.44円)
00-ETS-JUTW10			9,600本(96本×10段×10)	42,000円	31,630円(3.30円)

※新ラックプレゼント対象製品は「00-ETS-UT10」「00-ETS-JUTW10」です。

※適合ピペットについては一例をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

200μLエコノミーチップ

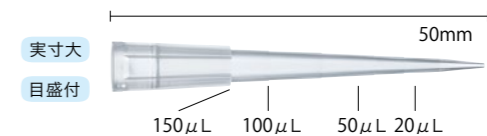


製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-ETS-SG	バルク	2~200	1,000本	2,000円	1,320円(1.32円)
00-ETS-SG10			10,000本(1,000本×10)	18,000円	11,860円(1.19円)
00-ETS-JSG	リフィルチップ	2~200	960本(96本×5段×2)	3,800円	2,730円(2.84円)
00-ETS-JSG10			9,600本(96本×5段×2×10)	35,000円	26,360円(2.75円)

※新ラックプレゼント対象製品は「00-ETS-SG10」「00-ETS-JSG10」です。

※適合ピペットについては一例をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

1000μLエコノミーチップ

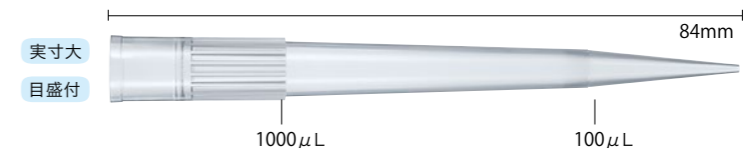

製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-ETS-LG	バルク	100~1000	1,000本	2,500円	1,630円(1.63円)
00-ETS-LG10			10,000本(1,000本×10)	23,000円	15,160円(1.52円)
00-ETS-JLG	リフィルチップ	100~1000	960本(96本×5段×2)	5,000円	3,530円(3.68円)
00-ETS-JLG10			9,600本(96本×5段×2×10)	45,000円	33,890円(3.53円)

※新ラックプレゼント対象製品は「00-ETS-LG10」「00-ETS-JLG10」です。

※適合ピペットについては一例をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

ニチリョードリームバンクに入会しませんか？

ニチリョードリームバンクでは製品をお使い頂いているお客様へお得で便利なサービスをご用意しております。



- 1. ポイント交換サービス** | ピペットからチップまで、ポイントを集めて対象商品と交換できます。
- 2. ポイント修理サービス** | ポイントでニチリョーのピペットとディスペンサーの修理サービスが受けられます。
- 3. おまかせ修理サービス** | 基本料金のみでニチリョーのマニュアルピペットの修理が受けられます。
- 4. メルマガ配信** | ニチリョー製品のおトクな情報やキャンペーン情報を定期的に配信いたします。
- 5. ポイント特典** | キャンペーン対象製品によっては会員様限定でポイントプレゼントなどの特典がございます。

ドリームバンク新規ご登録と会員番号の確認方法

ニチリョートップページ



ドリームバンク ポイント交換サービス

ピペットからチップまで、ポイントを集めて対象製品と交換できます。

くわしくは、
ニチリョーポイント交換 [検索](#)

ニチベットプレミアムLT 16point オートクレーパブルピペット ご希望の容量モデルを1本	ニチベットプレミアム 16point オートクレーパブルピペット ご希望の容量モデルを1本	ニチベットEXII 13point オートクレーパブルピペット ご希望の容量モデルを1本	ニチベットEX PlusII 20point 有機溶媒耐性ピペット ご希望の容量モデルを1本	ニチリョーLe 10point 超軽量ピペット ご希望の容量モデルを1本	ニチベットEXII MULTI 30point マルチチャンネルピペット ご希望の容量モデルを1本	ニチベットFII 10point 容量固定式ピペット ご希望の容量モデルを1本
ニチベットVII 10point 容量3段可変式ピペット ご希望の容量モデルを1本	ジャスター1100DG 16point デジタルマイクロピペット ご希望の容量モデルを1本	ニチメイトステッパー 16point 可変式連続分注器1本	MODEL8100 16point 可変式連続分注器1本	MODEL8800 30point マルチチャンネル 可変式連続分注器1本	ピペットメイト NEO 19point ピペットコントローラ1本	アキュベンサーJr. 14point ボトルトップディスペンサー ご希望の容量モデルを1本
ディスペットEX II 18point ボトルトップディスペンサー ご希望の容量モデルを1台	ディスペットMini 17point ボトルトップディスペンサー ご希望の容量モデルを1台	ディスペット 14point ボトルトップディスペンサー ご希望の容量モデルを1本	チューブオープナー 2point 3個入	ピペットスタンドMLT-STD2 5point ニチベット プレミアム、EXII、 EX PlusII、 ニチリョーLe、MULTI用 ※ピペットは含まれません	ピペットスタンドBM-STD 5point ニチベットプレミアム、EXII、 EX PlusII用 ※ピペットは含まれません	ピペットスタンド7000S 5point ニチベット7000、MULTI用 ※ピペットは含まれません
ピペットスタンド1100S 5point ジャスター1100DG用 ※ピペットは含まれません	プレミアムチップ 5point ご希望のチップを1ケース	プレミアムフィルターチップ 10point ご希望のチップを1ケース	ジャスターチップ 7point TS、TL、RTS、RTL ご希望のチップを1ケース	MODEL8100用シリンジ 7point ご希望の製品を1ケース	ニチメイトステッパー用シリンジ 10point ご希望の製品を1ケース	MODEL8800用シリンジ 12point 88-SAR、88-SBR ご希望の製品を1ケース ※カートリッジは含まれません
1000μL用フィルター 3point 10個入りを1ケース	5000μL用フィルター 3point 100個入りを1ケース	10mL用フィルター 3point 100個入りを1ケース	JCSS校正証明書 8point J-1、3どちらか	JCSS校正証明書 10point J-2、4どちらか		

※製造終了などのやむをえない事情により、ご希望の製品と交換できない場合があります。 ※対象製品、または交換必要ポイント数については予告なく変更する場合があります。

ドリームバンク ポイント修理・校正サービス

会員限定

ポイントでニチリョーのピペットとディスペンサーの修理サービスが受けられます。

※専用の修理依頼書が必要になります。

くわしくは、
ニチリョーポイント修理 [検索](#)

- 3 ポイント** ニチベットEXII/ニチベットEX PlusII/ニチリョーLe/
ニチベットEX/ニチベットEX Plus/
ニチベットFII&VII/ジャスター1100DG
- 5 ポイント** ニチベットEXII MULTI/ニチベット7000/
MODEL 8100/ニチメイトステッパー/
MODEL 8800/ピペットメイトNEO
- 8 ポイント** JCSS校正サービス
対象製品
ニチベットシリーズ/ニチリョーLe/
ジャスター1100DG

ドリームバンク ポイント修理サービス

会員限定

ドリームバンク会員様は基本料金のみでニチリョーのマニュアルピペットの修理が受けられます。

交換パーツは全て無償です。

くわしくは、
ニチリョーおまかせ修理 [検索](#)

シングルチャンネル	1本 5,000円	ニチベット EXII/ニチベット EX PlusII/ニチリョーLe/ニチベット EX/ ニチベット EX Plus/ニチベット FII&VII/ジャスター1100DG
マルチチャンネル	1本 8,000円	ニチベット EXII MULTI/ニチベット 7000シリーズ