

2020.10.15(木) ~ 2020.12.31(木)

臨床検査室限定!! 秋の特別キャンペーン

※本キャンペーンは臨床検査室にお勤めの方が対象です。

25%
OFF

P.2

オートクレープابل
マイクロピペット

Nichipet® Air



25%
OFF

P.3

オートクレープ用
滅菌バッグ
**Nichimate
AC-Bag**



15%
OFF

P.3

卓上小型
高圧蒸気滅菌器
**Nichimate
AutoClave**



30%
OFF

P.4

サーモリッド付き
小型ブロックインキュベーター

**Nichimate
Dry Bath Plus/Cool**



25%
OFF

P.4

小型ブロック
インキュベーター
**Nichimate
Dry Bath**



25%
OFF

P.5

小型卓上遠心機
**Nichimate
Flush**



MAX
30%
OFF

P.5

ボルテックスミキサー
**Nichimate
Mixer**



19%
OFF

P.5

UV 殺菌機能付き
ピペットスタンド
**Nichimate
UV Carousel**



P.6

ディスポーザブル遠沈管

Centrifuge Tube



P.6

エコノミーフィルターチップ

Economy Filter Tip



オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® Air

121°C
20min
Autoclavable

日本製

ドリームポイント
1 point

本体重量及びストローク荷重の軽量化により、長時間の作業による疲労感やストレスを低減。世界最高水準の精度・再現性を実現した、ニチペットシリーズの最新モデル。

① イージーキャリブレーション

専用治具により、容量測定値に目盛りを合わせるだけで調整が可能。

② ボディ

耐久性をそのままに、従来製品より最大 56%軽量化、約 70g を実現。コンパクト設計により操作性が向上。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。

③ 容量モデル



容量モデル毎に色分け (全 8 色)。



3 箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。

④ フィンガーレスト



人間工学に基づいた手にフィットする形状。

⑤ エジェクタ



ワンタッチで脱着でき、細い試験管などに対応。



25% OFF

⑥ ピペッティング

従来製品よりストローク荷重が最大 7.0% 軽減。

⑦ スムーズな容量設定



プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。

⑧ ボリュームインジケーター

作業中でも養老の確認が容易な設計。

⑨ ハイパーフロアシステム



吐出性能が格段に向上。吸引時のチップ内液残りを解消。(2、10、20 µL 機種対応)

製品コード	容量設定方式	容量範囲 (µL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2 (グレー●)	可変式	0.1 ~ 2	~± 1.4	~≤ 0.7	36,000 円	27,000 円
00-NAR-10 (ピンク●)		0.5 ~ 10	~± 1.0	~≤ 0.4		
00-NAR-20 (クリーム●)		2 ~ 20	± 3.0 ~± 1.0	≤ 1.5 ~≤ 0.3	33,000 円	24,750 円
00-NAR-100 (オレンジ●)		10 ~ 100	± 3.0 ~± 0.8	≤ 1.0 ~≤ 0.2		
00-NAR-200 (イエロー●)		20 ~ 200	± 1.8 ~± 0.6	≤ 0.7 ~≤ 0.2		
00-NAR-1000 (ブルー●)		100 ~ 1000	± 1.0 ~± 0.6	≤ 0.6 ~≤ 0.2		
00-NAR-5000 (グリーン●)		500 ~ 5000	± 2.0 ~± 0.5	≤ 0.6 ~≤ 0.15	38,000 円	28,500 円
00-NAR-10000 (ホワイト●)		1000 ~ 10000	± 2.0 ~± 0.5	≤ 0.6 ~≤ 0.15	43,000 円	32,250 円

*NAR-2の0.2µL以下およびNAR-10の1µL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。

Nichipet® Air
Carousel Stand 用



Nichipet® Air 用カローセルスタンドです。Nichipet Premium シリーズ、NICHIRYO Le も対応しています。

製品コード	仕様	適合ピペット	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	8本掛け	・Nichipet Air ・Nichipet Premiumシリーズ ・NICHIRYO Le	15,000 円	11,250 円

Nichipet® Air 専用
10000µL 用チップ



Nichipet® Air 専用の 10000µL 用チップです。より小さい力で脱着できるようになっています。

製品コード	パッケージ	容量範囲 (µL)	材質	容量目盛	入数	希望小売価格
00-BMT2-ZS	バラク	1000~10000	PP	1000µL 単位	200本	8,800 円
00BMT2-ZSR	ラックチップ				40本×2ラック	14,000 円
00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラックチップ					

オートクレーブ用滅菌バッグ

Nichimate AC-Bag

サンプル
提供OK

25%
OFF

シングルチャンネルのオートクレーバブルマイクロ
ピペットが丁度 1 本入るサイズ。

滅菌後は開封しなければ中の滅菌状態を 1 年間維持可能。

- 『Nichimate AutoClave』を使用して社内検証済みです。
メーカー推奨品のため安心してご利用いただけます。



Nichipet® Air(1000 μ L) を入れた場合



製品名	製品コード	おもな仕様	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト エーシーバッグ	00-NACB-P100	材質：【透明フィルム面】PP および PET 【紙面】滅菌紙（厚さ 70g/㎡）、 【印刷】AC インジケーターインク※1 寸法：【外寸】130×400mm 【内寸】110×390mm（いずれも1〜2mm程度の誤差が生じる場合あり） 備考：封をするためにヒートシーラーが必要※2	100 枚	7,000 円	5,250 円

※1ACインジケーターはオートクレーブ（高圧蒸気滅菌）により水色から茶色に変色しますが、目安であり滅菌を保証するものではありません。なお、シール済みの部分にかかるACインジケーター印刷は製造工程上、最初から茶色に変色している場合があります。※2ヒートシーラーは一般的なもので構いませんが、幅130mmに対応したもの、またハンディの簡易的なものではなく、卓上型のしっかりしたものをご使用ください（溶着には180℃程度が必要です）。●本製品は、ご購入から1年以内にご使用ください。●本製品は研究用です。医療目的でのご使用はできません。

卓上小型高圧蒸気滅菌器

Nichimate AutoClave

日本製

15%
OFF

オートクレーバブルマイクロピペットや小型器具の滅菌に最適な
卓上サイズの横型。簡単操作で滅菌と乾燥を全自動。
日々の滅菌作業を各段に省力化。

- 弊社ニチペット®の滅菌に最適。オートクレーブバッグに入れたニチペット（5〜6本収容可）のノズル内部の滅菌が可能です（121℃、20分）。
- カンタン操作。滅菌から乾燥まで全自動。滅菌と乾燥を個別実施も可能です。
- オートクレーバブルマイクロピペット以外にも、ラックチップや器具、開栓状態の容器等を滅菌可能です（培地等の液体の滅菌は不可）。
- 加圧用の水は天面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の運転で消費する水はわずかです。



別売バスケット



製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト オートクレーブ	00-NAC-1	滅菌温度：121℃（20～90分）／132℃（5～90分） 乾燥温度：約 100℃（0～90分）、送風機能あり（滅菌と乾燥は単独運転も可）。 滅菌チャンバー容積：12.5L、給水：本体上面から供給、約2.8L 外形寸法：430×453×367Hmm、本体重量：約 27kg 電源：AC100V、1.44kw（3P コンセント） 付属品：スノコ板 1 枚、排水フィルター 1 個、エアイベントフィルター（取付済）	560,000 円 （バスケット別売）	476,000 円 （バスケット別売）

●本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規模のものです。●ドアパッキンおよびエアイベントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水（精製水+水道水を推奨）は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。

- 別売部品：バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格
バスケット220	00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ。出し入れに使うハンドルが付属。外寸：190×270×100Hmm（突起部含まず）	18,000 円

サーモリッド付き小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath Plus/Cool

30% OFF

限られたスペースでも使いやすい超コンパクトサイズ。
小型ならではの高い温度精度と速い温度移行速度。
サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。



容器を上からも温めることで容器内試料の溶媒の蒸発を抑制します。高さの異なるマイクロチューブの同時使用も可能です。



サーモリッドがないタイプ(画像左側)との、65℃における比較。環境温度にもよりますが、サーモリッドは65℃程度まで有効です。



NDB+



NDB-C

製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイトドライバス・プラス (加熱のみ)	00-NDB+	使用温度範囲：室温+5℃～+100℃、外形寸法：110×156×97Hmm 温度移行速度：+20℃→+100℃≤15min	70,000円 (ブロック別売)	49,000円 (ブロック別売)
ニチメイトドライバス・クール (加熱および冷却)	00-NDB-C	使用温度範囲：室温-25℃～+100℃(*), 外形寸法：110×156×108Hmm 温度移行速度：+20℃→+100℃≤15min、+26℃→+4℃≤30min	120,000円 (ブロック別売)	84,000円 (ブロック別売)

(*) 室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で-10℃まで。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしスクールの冷却時にはOFFになります。

■別売部品：ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック(8×5本架)	00-NDB-B002P	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B015MS	16,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック(24本架)	00-NDB-B005MS	16,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B020CS	

●プラスおよびクールとも、下記の「ニチメイトドライバス」用のブロック(00-NDB-B015M、00-NDB-B020M)も使用可能です。

小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath

25% OFF

限られたスペースでも使いやすい超コンパクトサイズ。
小型ならではの高い温度精度と速い温度移行速度。
ブロック交換で0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLに対応。



別売ブロック
(NDB-B002P)



別売ブロック
(NDB-B015M)



製品名／備考	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイトドライバス (加熱のみ)	00-NDB	使用温度範囲：室温+5℃～+100℃、外形寸法：112×150×100Hmm 温度移行速度：+20℃→+100℃≤15min	50,000円 (ブロック別売)	37,500円 (ブロック別売)

■別売部品：ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック(8×5本架)	00-NDB-B002P	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B015M	16,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック(24本架)	00-NDB-B005MS	16,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B020C	

●シリーズ製品の「ニチメイトドライバス・プラス/クール」用のブロック(00-NDB-B015MS、00-NDB-B020MS)も使用可能です。

小型卓上遠心機

Nichimate Flush

フタの開閉で ON/OFF。付属のアダプターやローター交換で
5種類のマイクロチューブに対応。

<適合マイクロチューブ>

- 1.5/2.0mL × 8 本
- 0.5mL × 8 本 (付属アダプター使用)
- 0.2mL × 8 本 (付属アダプター使用)
- 0.2mL (8 連) × 4 本 (付属専用ローターに交換)

付属のアダプターとローターは本体底面に
収納できます (アダプターは 8 個まで)。



25%
OFF



製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト フラッシュ	00-NCF	最大回転数：6,000r/min (2,000 × g)、外形寸法：114 × 150 × 114Hmm	39,800円	29,850円

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer


強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。
50mL 遠沈管なら、40mL まで液量があっても確実に攪拌。



付属の標準ヘッド



別売のフラットホーム

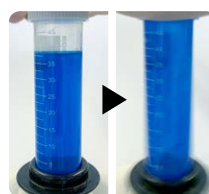

MAX
30%
OFF

製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト ミキサー	00-NMX	震動速度：200 ~ 3,000r/min、外形寸法：130 × 160 × 170Hmm	39,800円	27,860円
フラットホーム	00-NMX-F	直径 75 mm、滑り止めの凹凸がついた平らで広いヘッド。	4,800円	3,840円

UV殺菌機能付きピペットスタンド


Nichimate UV Carousel

マイクロピペットスタンドにUV殺菌機能をプラス。
立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。
28分間の照射で表面の汚染微生物を99%殺菌。

- マイクロピペットの表面をクリーンな状態に保てます。
- ほとんどのブランドのマイクロピペットに対応します。
- 紫外線による殺菌のため、簡単で経済的です。
- 殺菌後すぐにマイクロピペットを使えます。
- 実験データ：

UV照射時間と殺菌効果の関係

S. aureus の培養液で下部表面を汚染したマイクロピペットを Nichimate UV Carousel により UV に曝した。UV 照射の途中でマイクロピペットを取り出してゆき、各マイクロピペットの汚染部分をリンスして回収した液をプレーティングして生じたコロニーを数えた。結果、28分のUV照射で99%のコロニー数減少が見られた (当実験は外部機関により実施された)。

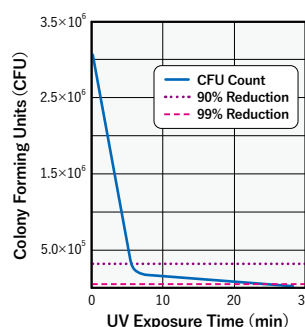

マイクロピペットは付属しません。

19%
OFF

製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト UV カローセル	00-NUVC-6	マイクロピペット架数：6本 (1000μL まで。多くのブランドに対応) (*) 殺菌灯：寿命約2000時間、1回の運転：28min、外形寸法：φ170 × 330Hmm	65,000円	52,800円

(*) 詳しくはお問合せください (いずれのブランドにおいても 5000 および 10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません)。●本製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

消耗品

※キャンペーン対象外

ディスポーザブル遠沈管

Centrifuge Tube



遠心強度 20,000 × g。
キャップのシール性が高く
耐熱・耐寒に優れる。滅菌済。

遠心強度・耐熱温度・材質等

- いずれも 20,000 × g。
- 耐熱温度：－80～＋121℃（内圧や衝撃なきこと）
- フタは高密度 PE 製、本体は PP 製。
- 電子線滅菌済、オートクレーブも可能。



キャップ上面はフラットな形状。
文字の書き込みが可能。

容量	パッケージ	製品コード	入数	希望小売価格
15mL	滅菌済 バルク	00-ETS-CT-15	400 (50×8) 個	10,000 円
50mL		00-ETS-CT-50	200 (20×10) 個	8,000 円

エコノミーフィルターチップ

Economy Filter Tip



容量バリエーションが豊富なシリーズ。
ラック入り滅菌済みで提供されるフィルター付きチップ。



●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。

容量	容量範囲	長さ	パッケージ	製品コード	入 数	希望小売価格
10 μ L 	0.1 ~ 10 μ L	38 mm	ラック入り 滅菌済	00-ETS-FUTRB	96 本× 10 ラック	13,000 円
10 μ L (ロング) 	0.5 ~ 10 μ L	45 mm		00-ETS-FSSRB		
40 μ L 	1 ~ 40 μ L	50 mm		00-ETS-FSGRB		
100 μ L 	1 ~ 100 μ L			00-ETS-FSERB		
200 μ L 	1 ~ 200 μ L	52 mm		00-ETS-FAGRB		
300 μ L 	1 ~ 300 μ L			00-ETS-FKRB		
1000 μ L 	100 ~ 1000 μ L	89 mm		00-ETS-FLGRB	96 本× 6 ラック	8,500 円

ドリームバンク会員様募集中

ニチリョードリームバンク専用ページにていつでもポイント登録、ポイント管理閲覧、ポイント交換申請、その他のサービスを行うことができます。その他、会員様限定のキャンペーン情報を配信させていただきます。

登録料、年会費は一切かかりません。ぜひご登録ください！

会員特典



ポイント交換サービス



ポイント修理サービス



おまかせ修理サービス



おまかせ修理サービスとは...

ドリームバンク会員様は基本料金のみでニチリョーのマニュアルピペットの修理を受けられます。定額修理なのでお見積りを確認する手間がなくなります。

- ・シングルチャンネル・・・5,200 円 / 本
- ・マルチチャンネル・・・8,200 円 / 本

ご登録はホームページ  より承ります！

<https://www.nichiryo.co.jp/dreambank/new/>

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

☎ 0120-66-9199 (営業業務課/直通)

✉ info@nichiryo.co.jp

越谷本社工場
〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1
TEL.048-989-1301 FAX.048-989-1333

東京営業本部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目10番1号 サクラビル3階
TEL.03-6273-7651 FAX.03-6273-7944

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館10階
TEL.06-6391-1057 FAX.06-6391-1058

浦和事業所
〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷五丁目5番11号
TEL.048-793-7071 FAX.048-837-5581

サービス&サポート
㈱サイメック ㈱ニチリョー 越谷本社工場内
TEL.048-986-0797 FAX.048-986-0798