

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer


- マイクロチューブや試験管に入れた液体試料を強力に攪拌します。
- 安定性が高く、攪拌中に本体が動きだすことはありません。
- 連続運転とタッチ運転の切換式です。
- 震動速度（攪拌の強弱）を変更できます。
- 標準ヘッドが付属、別売で広いヘッドもあります。



付属の標準ヘッドは、フィットする容器に震動を確実に伝える形状になっています。試験管やコニカル底のデイスボ遠沈管に最適です。



オプションのフラットホームは、タッチ運転でマイクロチューブを攪拌する場合に便利です。標準ヘッドにはフィットしない容器にもお使いください。

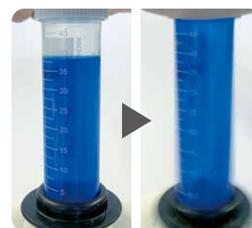

50mL デイスボ遠沈管なら、40mL まで液量があっても確実に攪拌できます。震動を効果的に伝えるために、同容器のキャップ部分をしっかりと持つのがお勧めです。

仕様・価格

| | |
|-----------|-----------------------|
| 製品名／製品コード | ニチメイト ミキサー／00-NMX |
| 震動速度／振幅 | 200～3,200r/min、3mm |
| 運転モード | 連続／タッチ 切換式 |
| 外形寸法／重量 | 130×160×170Hmm／約3.8kg |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 標準付属品 | 標準ヘッド |

●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。

オプション

必要に応じてお求めください。

| 製品名 | 製品コード | 直径 |
|---------|----------|------|
| フラットホーム | 00-NMX-F | 75mm |



フラットホーム取付例

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/> ☒ info@nichiryo.co.jp

東京オフィス
〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番4号
PMO神田岩本町Ⅱ 4階

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号
新大阪千代田ビル別館10階

●お問合せはWebサイトのお問合せフォームまたはEメールでお願い致します。
●2022年10月1日発行