


超小型ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer-mini

- 超小型ながら堅実な攪拌力のボルテックスミキサーです。
- マイクロチューブや小型試験管の攪拌に手軽で便利です。
- 50mLディスポ遠沈管に30mLを入れたものが、攪拌可能な最大容量となります。
- 震動速度は3,000rpm固定、タッチ運転のみのシンプル操作です。
- ヘッドカバーはゴム製です(損耗時のための交換部品も販売中)。
- 電源は、コンパクトなACアダプタ方式です。

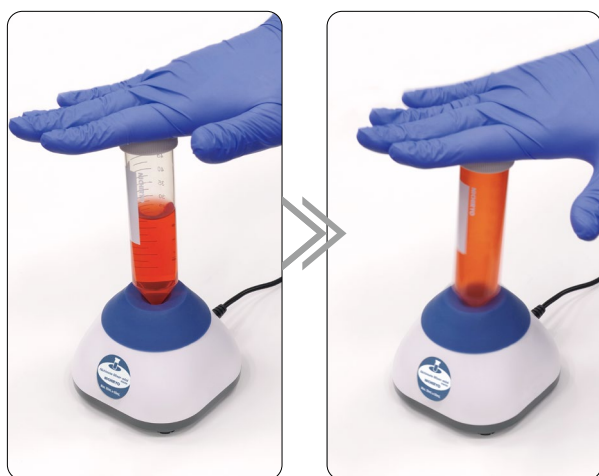

50mLディスポ遠沈管に入れた液体(30mLまで)を攪拌する場合、上からやや押さえつけるようにするのがコツです。押さえつける力が強すぎるとモーターに過負荷になりますのでご注意ください。



手のひらに載る大きさです。

仕様・価格

製品名/製品コード	ニチメイトミキサーミニ/00-NMXXM
震動速度(※)/振幅/運転モード/モータータイプ	3000rpm固定、4.5mm、タッチ運転のみ、ブラシレスモーター
攪拌可能な最大容量(※)	50mLでディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合)
使用環境条件	+5°C~+40°C、湿度80%まで
本体外形寸法及び重量	93×93×72Hmm、約0.4kg
標準付属品	ACアダプタ
電源(ACアダプタ)	100-240V、0.3A、50-60Hz(最大消費電力約3W)

※攪拌する液体の粘度、容器の持ちかたや当てかた、設置場所の状態により、仕様を満たさない場合があります。滑りやすい場所や本製品のゴム足に埃が附着している場合は、50mLディスポ遠沈管を攪拌した際に本製品が滑り動く場合があります。●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

●お問い合わせは、弊社Webサイトのお問い合わせフォームか上記メールアドレスまで。●表示価格は消費税を含みません。