

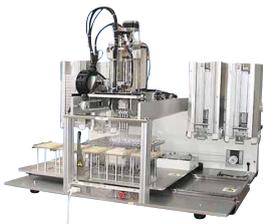
カスタムメイド自動分注装置 (カスタムメイド製品)

NSS-1000 II

- お客様のご要望に合わせて、ベース製品〈NSS-1000 II〉等からのカスタムメイドにて自動分注装置の設計製作を承ります。
- ワーキングエリアはA4サイズ等の小型デスクトップタイプから大型ワークステーションまで対応可能です。さらに、制御ソフトウェアはシステムに応じてC言語、VisualBasic等、ご要望に合わせて製作致します。
- 右図の感染症の遺伝子検査用前処理装置をはじめ、各種の製作実績 (下記参照) があります。お気軽にご相談ください。



カスタムメイドシステム例

外 観	品 名	主な特長
	蛋白結晶化自動化装置	シッティングドロップ式蛋白結晶化用途 蛋白サンプルを専用マイクロプレートを使用して結晶化を行う簡易的自動化システム。
	薬剤感受性試験用分注装置	試験管からマイクロプレートへの高速処理用途 4連分注ノズルは間隔9~15mmでピッチ可変、かつ90°回転する機構を組み込んだシステム。
	クラミジア検査用小分け分注装置	検査用サンプル自動調整用途 クラミジア・トラコマチス検査を実施する際に必要な検体サンプル調整を、カルポータチューブ内の綿棒を取り除くことなく自動的に行うシステム。
	糖鎖分析研究用分注装置	カラムへの溶液充填用途 設置したカラムへの自動分注装置。ステージ下部に廃液ラックを設置でき、廃液の回収が可能なシステム。