PIPETTE

マイクロピペット用ディスポーザブルチップ

Premium Tip

0.2 points







- ●チップ先端部を表面張力が少なくなる形状に成形することで、 液切れ性能を向上させています。
- ●ノズル装着部の内径寸法を均一化することで気密性および 排水性を向上、高精度のピペッティングが可能です。
- ●チップ材質には高品質のポリプロピレンを使用しており、耐薬性 に優れています。
- ●ラック入りはいずれもオートクレーブ滅菌(121℃ 20分)が可能です (必要以上にオートクレーブにかけると、変形等の現象が起こる ことがありますのでご注意ください)。
- ●DNase/RNaseおよびPyrogenフリーです(X/Z/ZSを除く)。
- UV耐性に優れています。
- ●ニチリョーのマイクロピペットは、本製品を使用して検定や校正 を行っています。

	シリーズ	製品コード	パッケージ	容量範囲(µL)	色	入数	推奨ピペット**
UT		00-BMT2-UT	バルク	0.1~10		1,000本	NAR-2、10 NAR-10M8、10M12
		00-BMT2-UTWR	ラック			96本 ×	NPP/NLT-2
		00-BMT2-UTWRB	滅菌済ラック			10ラック	NPX2/NPLO2-2 NPM-8VP、12VP
ssw		00-BMT2-SSW	バルク	0.5~10		1,000本	NPP/NLT-10 NPX2/NPLO2-10 NLE-10 NPF2-10
		00-BMT2-SSWR	ラック			96本	
		00-BMT2-SSWRB	滅菌済ラック			10ラック	
SG		00-BMT2-SG	バルク	2~200		1,000本	NAR-20. 100. 200 NAR-100M8. 100M12. 200M8. 200M12 NPP / NLT-20. 100. 200 NPX2 / NPLO2-20. 100. 200 NLE-20. 100. 200 NPF2-20~200 / NPV2-S. M NPM-8SP. 8LP. 12SP. 12LP
		00-BMT2-SGR	ラック			96本 ×	
		00-BMT2-SGRB	滅菌済ラック			10ラック	
SE		00-BMT2-SE	バルク	2~200		1,000本	NPX/NPLO-20、100、200
		00-BMT2-SER	ラック			96本	
		00-BMT2-SERB	滅菌済ラック			10ラック	
		00-BMT2-K	バルク	30~300		1,000本	NAR-300M8、300M12 NPM-8KP、12KP
K		00-BMT2-KR	ラック			96本 ×	
		00-BMT2-KRB	滅菌済ラック		チャ	10ラック	
LG		00-BMT2-LG	バルク	100~1000	ナチュラル	1,000本	NAR-1000 NPP / NLT-1000 NPX2/NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500、1000 NPV2-L
		00-BMT2-LGR	ラック			96本 ×	
		00-BMT2-LGRB	滅菌済ラック			10ラック	
LE		00-BMT2-LE	バルク	100~1000		1,000本	NPX-1000 NPLO-1000
		00-BMT2-LER	ラック			96本	
		00-BMT2-LERB	滅菌済ラック			10ラック	
		00-BMT2-X	バルク	500~5000		200本	NAR-5000 NPP-5000 NPX2/NPLO2-5000
х		00-BMT2-XR	ラック			50本 ×	
		00-BMT2-XRB	滅菌済ラック			2ラック	
		00-BMT2-Z	バルク	1000~10000	-	200本	NPP-10000 NPX2 / NPLO2-10000
z		00-BMT2-ZR	ラック			40本	
		00-BMT2-ZRB	滅菌済ラック			2ラック	
zs		00-BMT2-ZS	バルク	1000~10000		200本	NAR-10000
		00-BMT2-ZSR	ラック			40本	
		00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラック			2ラック	

※推奨ピペットとは、校正で使用しているマイクロピペットです。その他の適合については、お問い合わせください。●ドリームバンクポイントは、容量やパッケージに関わらず同じです。

マイクロピペット用ディスポーザブルフィルターチップ

Premium Filter Tip








- ●チップ内にフィルターを備えており、吸引時の意図しないエアロ ゾルのマイクロピペット内への吸い込みによるコンタミネーション
- ●チップの成形や材質における特長は、Premium Tipと同様です。
- ●ラック入りは電子線滅菌済です。
- DNase/RNaseおよびPyrogenフリーです。



	>.ul ⇒*	4	3 ¥h	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
シリーズ		製品コード	パッケージ	容量範囲(µL)	色	入数	適合ピペット
UT		00-BMT2-FUT	バルク	0.1~10		1,000本	NAR-2.10 NAR-10M8.10M12 NPP / NLT-2 NPX2 / NPLO2-2 NPM-8VP.12VP
		00-BMT2-FUTRB	滅菌済ラック			96本×10ラック	
ss		00-BMT2-FSS	バルク	0.5~10		1,000本	NAR-10 NPP / NLT-10 NPX2 / NPLO2-10 NLE-10 NPF2-10
		00-BMT2-FSSRB	滅菌済ラック			96本×10ラック	
SG		00-BMT2-FSG	バルク	2~20	ナチュラル	1,000本	NAR-20 NPP/NLT-20 NPX2/NPLO2-20 NLE-20 NPF2-20
		00-BMT2-FSGRB	滅菌済ラック			96本×10ラック	
SE		00-BMT2-FSE	バルク	10~100		1,000本	NAR-100 NAR-100M8, 100M12 NPP/NLT-100 NPX2/NPLO2-100 NLE-100 NPM-8SP, 12SP
		00-BMT2-FSERB	滅菌済ラック			96本×10ラック	
AG		00-BMT2-FAG	バルク	20~200		1,000本	NAR-200 NAR-200M8\200M12 NPP/NLT-200
		00-BMT2-FAGRB	滅菌済ラック			96本×10ラック	NPX2/NPLO2-200 NPF2-200/NPV2-M NPM-8LP、12LP
LG		00-BMT2-FLG	バルク	100~1000		1,000本	NAR-1000 NPP / NLT-1000 - NPX2 / NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-1000 / NPV2-L
		00-BMT2-FLGRB	滅菌済ラック			96本×10ラック	
LE		00-BMT2-FLE	バルク	100~1000		1,000本	NPX2/NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-1000/NPV2-L
		00-BMT2-FLERB	滅菌済ラック			96本×10ラック	

■ Premium Tip 外形図 (UT~ZS) 容量の目盛り線は、目安になります。

容量の目盛り線およびフィルター位置(グレーの網掛け部分)は、目安になります。

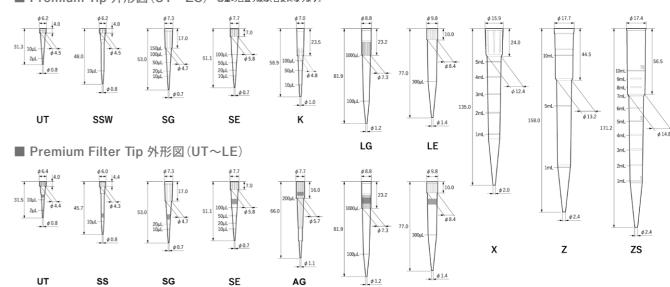

LG

LE

25 ●製品価格については弊社Webサイトをご覧ください。 www.nichiryo.co.jp 26