


手動式ピペットポンプ

Pipette Mate® eco

- 軽量(約120g)で扱いやすい、大容量手動式ピペットポンプです。
- 海水やドラフト内等、電動ピペットコントローラが苦手とする溶媒溶液や環境でのご使用にも最適です。
- 上部のラバーボールを握って空気を押し出して潰すことで吸引力が発生します。目一杯潰すと、50mLを吸引できます。
- ガラス製及びプラスチック製の1～100mLセロロジカルピペット(メスピペット)等が使用できます。
- ピペット挿入部内部にフィルターを備えています(交換可能)。

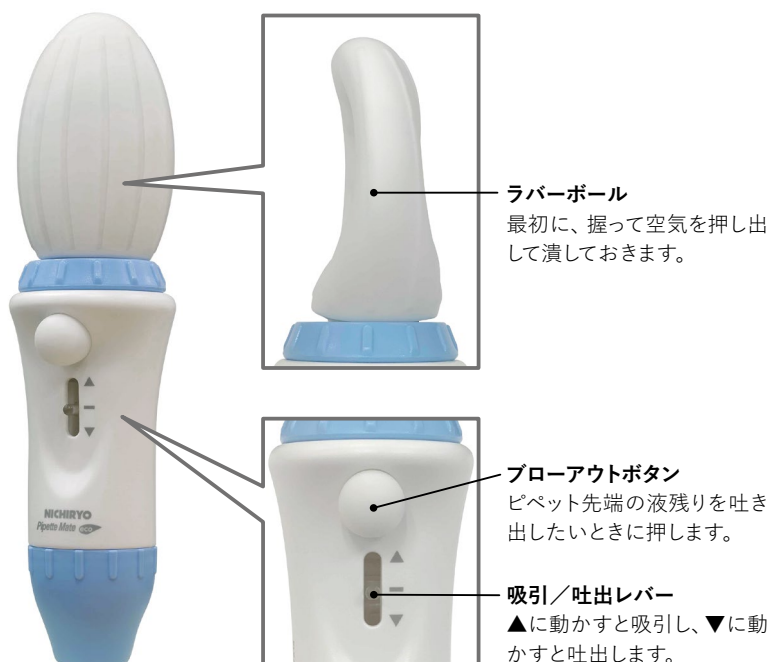

仕様・価格

製品名/製品コード	ピペットメイト エコ/00-PMECO
吸引吐出容量	0.1～50mL
使用可能ピペット	1～100mL セロロジカルピペット(メスピペット)、外径φ5～8mmのバスツールピペット等
フィルター	φ29mm、ポアサイズ3.0μm、疎水性PTFE
外径寸法/重量	最大外径φ57×206Hmm(突起部含まず)、約120g
標準付属品	フィルター(内部に取付済)

● 別売部品(補修部品): ピペットホルダー(00-PMECO-RP1)、フィルター(00-PMSLM-RP2) ● 製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。