

オートクレーブブルマイクロピペット

Nichipet® EXⅢ

国産マイクロピペットのスタンダード。
多くの研究者の手に馴染んできた
ベストセラーの最新モデル。

高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。

耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌 (121℃・20分) も可能な堅牢ボディ。

簡単に着脱可能

エジェクタパイプをネジ止め式にすることで意図しない脱落を防止、着脱も容易。

容量モデル毎に色分け (全8色)。
2箇所容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。

従来製品よりストローク荷重を軽量化。長時間使用時の疲れを軽減。

ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。

容量モデル毎に色分け (全8色)。
2箇所容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。

修理定額

AC 滅菌可

UV 殺菌可

ドリームバンクポイント 1 point

容量調整治具

仕様

製品コード	容量設定方式	容量範囲 (μL)	目盛単位 (μL)	適合チップ
00-NPX3-2 (グレー●)	可変式	0.1~2	0.002	BMT2-UT / UTWR2 / UTWRB2
00-NPX3-10 (ピンク●)		0.5~10	0.01	BMT2-UT / UTWR2 / UTWRB2
00-NPX3-20 (クリーム●)		2~20	0.02	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPX3-100 (オレンジ●)		10~100	0.1	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPX3-200 (イエロー●)		20~200	0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPX3-1000 (ブルー●)		100~1000	1	BMT2-LG / LGR2 / LGRB2
00-NPX3-5000 (グリーン●)		1000~5000	10	BMT2-X / XR / XRB
00-NPX3-10000 (ホワイト●)		1000~10000	10	BMT2-ZS / ZSR / ZSRB

●適合チップの詳細は19~20ページをご参照ください。

系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV)

製品コード	測定容量 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	製品コード	測定容量 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)
00-NPX3-2	0.2	±12.0*	≤6.0*	00-NPX3-200	20	±2.5	≤0.7
	1	±2.5	≤1.5		100	±1.0	≤0.3
	2	±1.5	≤0.7		200	±0.6	≤0.2
00-NPX3-10	1	±2.5*	≤1.8*	00-NPX3-1000	100	±3.0	≤0.6
	5	±1.5	≤0.8		500	±1.0	≤0.2
	10	±1.0	≤0.4		1000	±0.8	≤0.2
00-NPX3-20	2	±5.0	≤1.5	00-NPX3-5000	500	±2.4	≤0.6
	10	±1.0	≤0.6		2500	±1.2	≤0.25
	20	±1.0	≤0.3		5000	±0.6	≤0.15
00-NPX3-100	10	±3.0	≤1.0	00-NPX3-10000	1000	±3.0	≤0.6
	50	±1.0	≤0.3		5000	±0.8	≤0.2
	100	±0.8	≤0.2		10000	±0.6	≤0.15

※NPX3-2の0.2μL未満、NPX3-10の1μL未満における系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。
●それぞれの系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) は、仕様に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。

グリス

	製品コード	00-NX3-GRS
	入数	1個
	対応機種*	Nichipet EXⅢ

スタンド

近日発売予定

容量調整治具

近日発売予定

フィルター

適合機種	製品コード	入数
1000 μL	00-NX3-F1000	10個入
5000 μL	00-NX3-F15000	
10000 μL	00-NX3-F15000	



[分解図・部品]

- カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。
- 本体には UV 耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間の UV 照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) に影響はありません。

マイクロピペット用ディスポーザブルチップ

Premium Tip

ドリームバンクポイント
0.2 points

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

AC
滅菌可

UV
殺菌可

[X/Z/ZSを除く]

- チップ先端部を表面張力が小さくなる形状に成形することで、液切れ性能を向上させています。
- ノズル装着部の内径寸法を均一化することで気密性と排水性を向上、高精度のピペティングが可能です。
- チップ材質には高品質のポリプロピレンを使用しており、耐薬性に優れています。
- ラックはオートクレーブ滅菌(121℃ 20分)が可能です、オートクレーブ滅菌の回数を重ねると変形等が起こることがありますのでご注意ください。
- DNase/RNaseおよびPyrogenフリーです(X/Z/ZSを除く)。
- UV耐性に優れています。
- ニチリョーのマイクロピペットは、本製品を使用して検定や校正を行っています。




仕様

シリーズ			製品コード	パッケージ	容量範囲 (μL)	色	入 数	推奨マイクロピペット*
UT			00-BMT2-UT	バルク	0.1～10	ナチュニラル	1,000本	NAR-2, 10 NAR-10M8, 10M12
			00-BMT2-UTWR2	ラック			96本 × 10ラック	NPP / NLT-2 NPX2 / NPX3 / NPLO2-2 NPM-8VP, 12VP
			00-BMT2-UTWRB2	滅菌済ラック				
SSW			00-BMT2-SSW	バルク	0.5～10		1,000本	NPP / NLT-10
			00-BMT2-SSWR2	ラック			96本 × 10ラック	NPX2 / NPX3 / NPLO2-10 NLE-10
			00-BMT2-SSWRB2	滅菌済ラック				NPF2-10
SG			00-BMT2-SG	バルク	2～200		1,000本	NAR-20, 100, 200 NAR-100M8, 100M12, 200M8, 200M12
			00-BMT2-SGR2	ラック			96本 × 10ラック	NPP / NLT-20, 100, 200 NPX2 / NPX3 / NPLO2-20, 100, 200
			00-BMT2-SGRB2	滅菌済ラック				NLE-20, 100, 200 NPF2-20～200 / NPV2-S, M NPM-8SP, 8LP, 12SP, 12LP
K			00-BMT2-K	バルク	30～300		1,000本	NAR-300M8, 300M12 NPM-8KP, 12KP
			00-BMT2-KR	ラック			96本 × 10ラック	
			00-BMT2-KRB	滅菌済ラック				
LG			00-BMT2-LG	バルク	100～1000		1,000本	NAR-1000 NPP / NLT-1000
			00-BMT2-LGR2	ラック			96本 × 10ラック	NPX2 / NPX3 / NPLO2-1000 NLE-1000
			00-BMT2-LGRB2	滅菌済ラック				NPF2-500, 1000 NPV2-L
X			00-BMT2-X	バルク	500～5000		200本	NAR-5000 NPP-5000 NPX2 / NPX3 / NPLO2-5000
			00-BMT2-XR	ラック			50本 × 2ラック	
			00-BMT2-XRB	滅菌済ラック				
Z			00-BMT2-Z	バルク	1000～10000		200本	NPP-10000 NPX2 / NPLO2-10000
			00-BMT2-ZR	ラック			40本 × 2ラック	
			00-BMT2-ZRB	滅菌済ラック				
ZS			00-BMT2-ZS	バルク	1000～10000		200本	NAR / NPX3-10000
			00-BMT2-ZSR	ラック			40本 × 2ラック	
			00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラック				

※推奨マイクロピペットとは、本製品を用いて校正している弊社マイクロピペットのことです。他社製マイクロピペットへの適合については、お問い合わせください。

実寸大製品画像

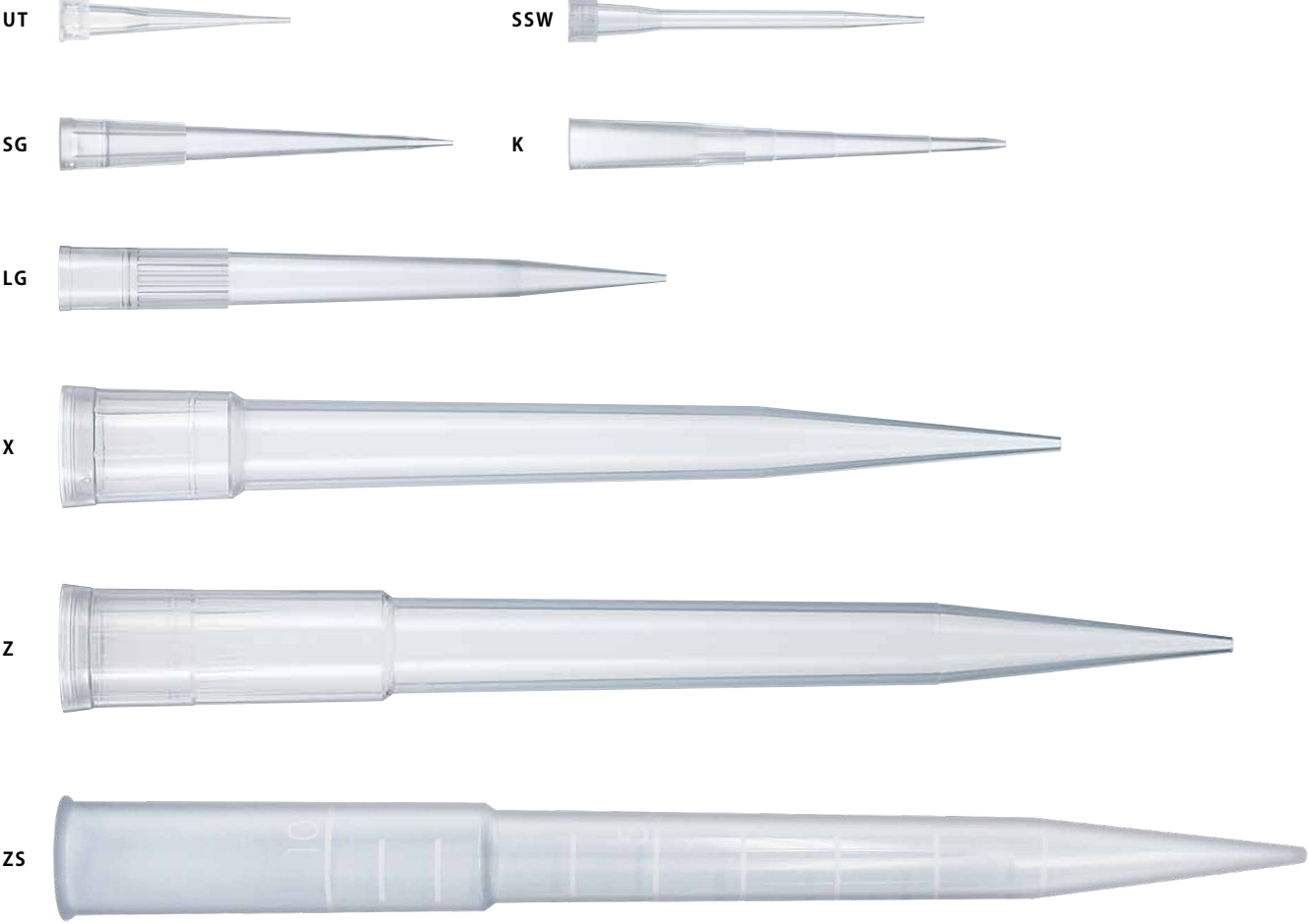

寸法図

