

マイクロピペット用ディスプレイチップ

## Premium Tip

ドリームバンクポイント  
0.2 points

Pyrogen  
FREE

DNase  
RNase  
FREE

AC  
滅菌可

UV  
殺菌可

[X/Z/ZSを除く]




- チップ先端部を表面張力が小さくなる形状に成形することで、液切れ性能を向上させています。
- ノズル装着部の内径寸法を均一化することで気密性と排水性を向上、高精度のピペッティングが可能です。
- チップ材質には高品質のポリプロピレンを使用しており、耐薬性に優れています。
- ラックはオートクレーブ滅菌(121℃ 20分)が可能です。オートクレーブ滅菌の回数を重ねると変形等が起こることがありますのでご注意ください。
- DNase/RNaseおよびPyrogenフリーです(X/Z/ZSを除く)。
- UV耐性に優れています。
- ニチリョーのマイクロピペットは、本製品を使用して検定や校正を行っています。

### 仕様

シリーズ	製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	色	入数	推奨マイクロピペット*
UT	00-BMT2-UT	バルク	0.1~10	ナチュラル	1,000本	NAR-2, 10 NAR-10M8, 10M12 NPP/NLT-2 NPX2/NPX3/NPLO2-2 NPM-8VP, 12VP
	00-BMT2-UTWR2	ラック			96本	
	00-BMT2-UTWRB2	滅菌済ラック			10ラック	
SSW	00-BMT2-SSW	バルク	0.5~10	ナチュラル	1,000本	NPP/NLT-10 NPX2/NPX3/NPLO2-10 NLE-10 NPF2-10
	00-BMT2-SSWR2	ラック			96本	
	00-BMT2-SSWRB2	滅菌済ラック			10ラック	
SG	00-BMT2-SG	バルク	2~200	ナチュラル	1,000本	NAR-20, 100, 200 NAR-100M8, 100M12, 200M8, 200M12 NPP/NLT-20, 100, 200 NPX2/NPX3/NPLO2-20, 100, 200 NLE-20, 100, 200
	00-BMT2-SGR2	ラック			96本	
	00-BMT2-SGRB2	滅菌済ラック			10ラック	
K	00-BMT2-K	バルク	30~300	ナチュラル	1,000本	NAR-300M8, 300M12 NPM-8KP, 12KP
	00-BMT2-KR	ラック			96本	
	00-BMT2-KRB	滅菌済ラック			10ラック	
LG	00-BMT2-LG	バルク	100~1000	ナチュラル	1,000本	NAR-1000 NPP/NLT-1000 NPX2/NPX3/NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500, 1000
	00-BMT2-LGR2	ラック			96本	
	00-BMT2-LGRB2	滅菌済ラック			10ラック	
X	00-BMT2-X	バルク	500~5000	ナチュラル	200本	NAR-5000 NPP-5000 NPX2/NPX3/NPLO2-5000
	00-BMT2-XR	ラック			50本	
	00-BMT2-XRB	滅菌済ラック			2ラック	
Z	00-BMT2-Z	バルク	1000~10000	ナチュラル	200本	NPP-10000 NPX2/NPLO2-10000
	00-BMT2-ZR	ラック			40本	
	00-BMT2-ZRB	滅菌済ラック			2ラック	
ZS	00-BMT2-ZS	バルク	1000~10000	ナチュラル	200本	NAR/NPX3-10000
	00-BMT2-ZSR	ラック			40本	
	00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラック			2ラック	

\*推奨マイクロピペットとは、本製品を用いて校正している弊社マイクロピペットのことで、他社製マイクロピペットへの適合については、お問い合わせください。

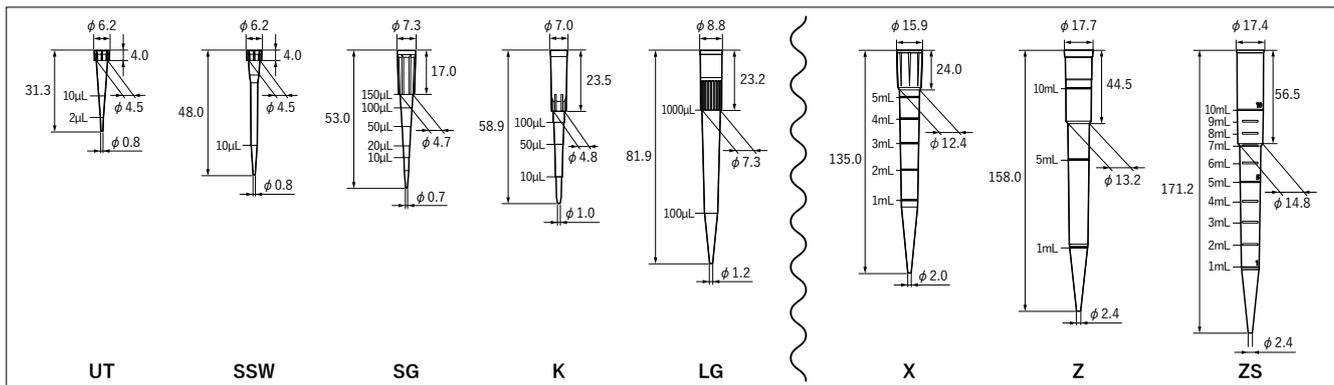

○製品価格については弊社Webサイトをご覧ください。