


■仕様・価格

製品コード(色)	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	希望小売価格	製品コード(色)	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	希望小売価格
00-NAR-2(●グレー)	可変式	0.1~2	0.002	36,000円	00-NAR-200(●イエロー)	可変式	20~200	0.2	33,000円
00-NAR-10(●ピンク)		0.5~10	0.01	36,000円	00-NAR-1000(●ブルー)		100~1000	1	33,000円
00-NAR-20(●クリーム)		2~20	0.02	33,000円	00-NAR-5000(●グリーン)		500~5000	5	38,000円
00-NAR-100(●オレンジ)		10~100	0.1	33,000円	00-NAR-10000(●ホワイト)		1000~10000	10	43,000円

■チップ/ラックチップ(オートクレーブ可能)

製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	入数	材質	カラー	容量目盛	適合ピペット	希望小売価格	製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	入数	材質	カラー	容量目盛	適合ピペット	希望小売価格
00-BMT2-UT	バレル	0.1~10	1000本	PP	ナチュラル	2μL	00-NAR-2	9,000円	00-BMT2-LG	バレル	100~1000	1000本	PP	ナチュラル	100μL	00-NAR-1000	8,500円
00-BMT2-UTWR	ラックチップ		96本×10ラック			10μL	00-NAR-10	13,000円	00-BMT2-LGR	ラックチップ		96本×10ラック			1000μL	00-NAR-1000	11,000円
00-BMT2-UTWRB	滅菌済みラックチップ	0.5~10	1000本			10μL	00-NAR-10	16,000円	00-BMT2-LGRB	滅菌済みラックチップ	500~5000	200本			1000μL単位	00-NAR-5000	16,000円
00-BMT2-SSW	バレル		1000本			10μL	00-NAR-10	9,000円	00-BMT2-X	バレル		200本			1000μL単位	00-NAR-5000	8,000円
00-BMT2-SSWR	ラックチップ	2~200	96本×10ラック			10μL, 20μL	00-NAR-20	11,000円	00-BMT2-XR	ラックチップ	1000~10000	50本×2ラック	PP	ナチュラル	1000μL単位	00-NAR-5000	8,000円
00-BMT2-SSWRB	滅菌済みラックチップ		96本×10ラック			50μL, 100μL	00-NAR-100	14,000円	00-BMT2-XRB	滅菌済みラックチップ		40本×2ラック			1000μL単位	00-NAR-5000	13,000円
00-BMT2-SG	バレル	2~200	1000本			150μL	00-NAR-200	8,500円	00-BMT2-ZS	バレル	1000~10000	200本			1000μL単位	00-NAR-10000	8,800円
00-BMT2-SGR	ラックチップ		96本×10ラック			150μL	00-NAR-200	11,000円	00-BMT2-ZSR	ラックチップ		40本×2ラック			1000μL単位	00-NAR-10000	8,800円
00-BMT2-SGRB	滅菌済みラックチップ							14,000円	00-BMT2-ZSRB	滅菌済みラックチップ							14,000円

※ 部分は00-NAR-10000専用のチップになります。

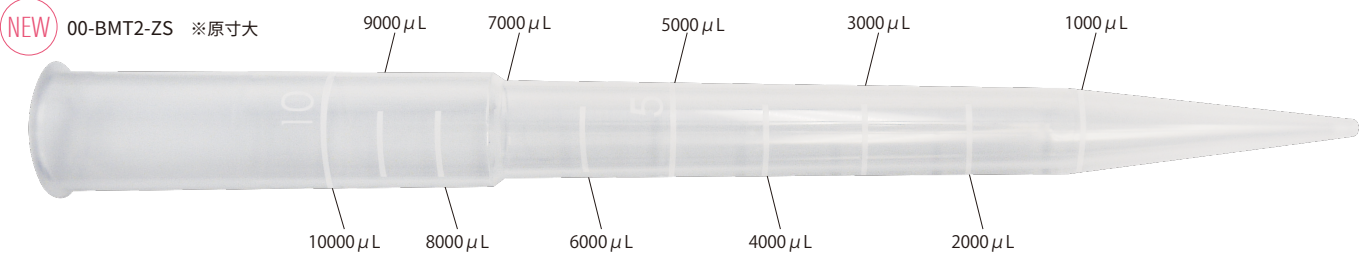

■ Nichipet[®] Air 用カラーセルスタンド

製品コード	仕様	希望小売価格
00-NAR-STD	8本掛け	15,000円

- ・ Nichipet[®] Premiumシリーズ、NICHIRYO Leも使用可能です。
- ・ チップを装着したまま、スタンドにかけることができます (Nichipet Airのみ)。

※2020年10月以降発売予定。

※画像は開発中のものになります。

■ ノズルフィルター

製品コード	適合機種	入数	希望小売価格
00-NAR-F15000	00-NAR-5000 00-NAR-10000	10個	2,000円



■ 容量調整治具

製品コード	入数	希望小売価格
00-NAR-AT	1個	3,000円



■ グリス

製品コード	入数	希望小売価格
00-NAR-GRS	1個	500円

- 分解図・部品一覧については弊社 HP をご覧ください。
- 本カタログに掲載の製品仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 個人情報の取扱いにつきましては、弊社 Web サイトをご参照ください。

株式会社 ニチリョー <https://www.nichiryo.co.jp/>

越谷本社工場 〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1
TEL.048-989-1301 FAX.048-989-1333

東京営業本部 〒101-0054東京都千代田区神田錦町一丁目10番1号 サクラビル3階
TEL.03-6273-7651 FAX.03-6273-7944

大阪営業所 〒532-0003大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館10階
TEL.06-6391-1057 FAX.06-6391-1058

浦和事業所 〒336-0034埼玉県さいたま市南区内容五丁目5番11号
TEL.048-793-7071 FAX.048-837-5581

サービス & サポート ㈱サイメック ㈱ニチリョー 越谷本社工場内
TEL.048-986-0797 FAX.048-986-0798

☎ 0120-66-9199 (受付時間/平日9:00~17:30) ✉ info@nichiryo.co.jp



NEW

最軽量級マイクロピペット

Nichipet[®] Air

● "Nichipet" および "ニチペット"、"Air" は(株)ニチリョーの登録商標です。

NEW

Nichipet® Air

121℃
20min
Autoclavable

日本製


ドリームポイント
1 point

本体重量及びストローク荷重の軽量化により、長時間の作業による疲労感やストレスを低減しました。
世界最高水準の精度・再現性を実現した、ニチペットシリーズの最新モデルです。

イージーキャリブレーション ピペッティング




専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。

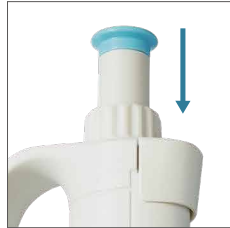

精度・再現性はそのままに、従来製品よりストローク荷重が最大70%軽減。

スムーズな容量設定

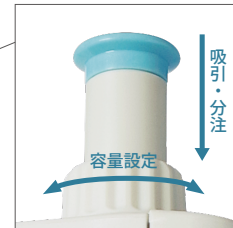

プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。

フィンガーレスト



人間工学に基づいた、手にフィットする形状。

エジェクタ



ワンタッチで脱着でき、細い試験管などに対応。

ハイパープロアシステム



吐出性能が格段に向上。吸引時のチップ内液残りを解消。(2、10、20 μ L機種対応)

容量モデルの識別



3箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。

ボリュームインジケータ



作業中でも容量の確認が容易な設計。

ボディ




耐久性をそのままに、従来製品より最大56%軽量化、約70gを実現。コンパクト設計により操作性が向上。本体丸ごとオートクレープ滅菌が可能。


製品ラインナップ (全8色)



ストローク荷重 他社製品比較 (1000 μ L)

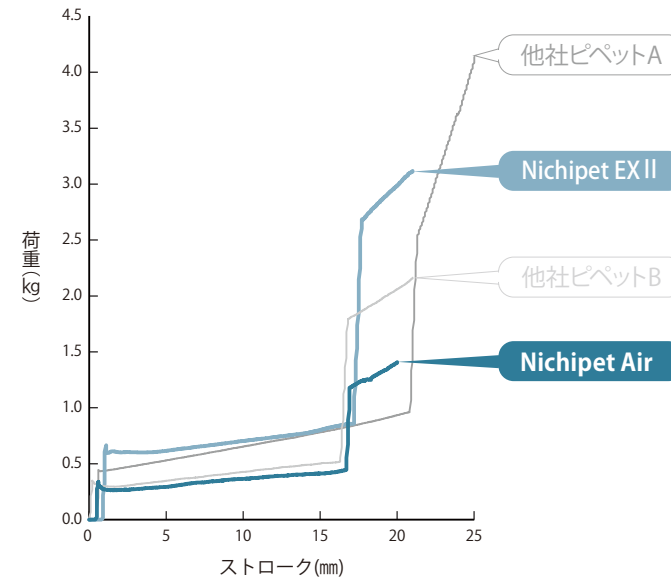

本体重量 他社製品比較 (10000 μ L)

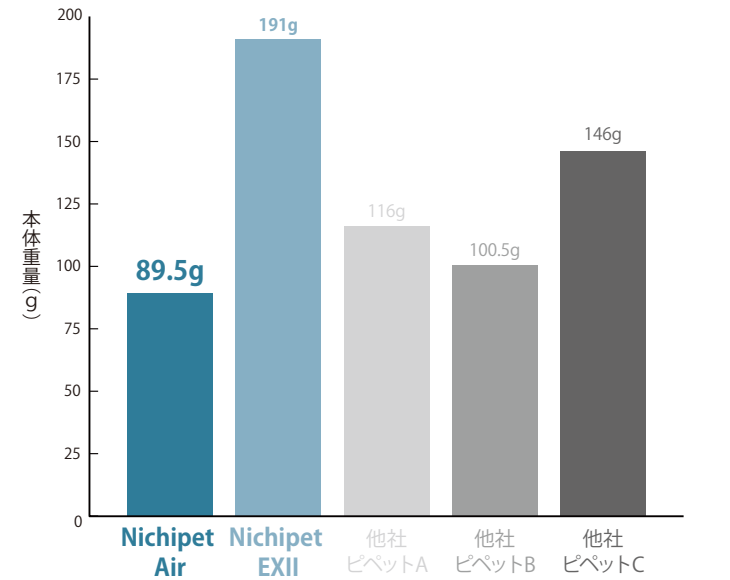

世界最高水準の精度・再現性

容量 (色)	測定容量 (μ L)	精度 (%)	再現性 (%)	容量 (色)	測定容量 (μ L)	精度 (%)	再現性 (%)
2 μ L (● グレー)	0.2	$\pm 12.0^*$	$\leq 6.0^*$	200 μ L (● イエロー)	20	± 1.8	≤ 0.7
	1	± 2.5	≤ 1.5		100	± 1.0	≤ 0.3
	2	± 1.4	≤ 0.7		200	± 0.6	≤ 0.2
10 μ L (● ピンク)	1	± 2.5	≤ 1.8	1000 μ L (● ブルー)	100	± 1.0	≤ 0.6
	5	± 1.5	≤ 0.8		500	± 0.8	≤ 0.2
	10	± 1.0	≤ 0.4		1000	± 0.6	≤ 0.2
20 μ L (● クリーム)	2	± 3.0	≤ 1.5	5000 μ L (● グリーン)	500	± 2.0	≤ 0.6
	10	± 1.2	≤ 0.6		2500	± 0.7	≤ 0.25
	20	± 1.0	≤ 0.3		5000	± 0.5	≤ 0.15
100 μ L (● オレンジ)	10	± 3.0	≤ 1.0	10000 μ L (● ホワイト)	1000	± 2.0	≤ 0.6
	50	± 1.0	≤ 0.3		5000	± 0.8	≤ 0.2
	100	± 0.8	≤ 0.2		10000	± 0.5	≤ 0.15

※2 μ Lモデルの0.2 μ L以下の精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。