

2022.8.22(月)⇨2022.11.18(金)

New Product Campaign 2022

小型簡易遠心機(デジタルタイマー付き)

Nichimate Flush II

カバーを閉じて遠心開始、
カバーを開けるかタイマーで
遠心停止の簡単操作。

- 回転速度は6,000rpm固定(最大遠心力2,000×g)。
- ローター2種とアダプターで、各種マイクロチューブに対応。
- タイマー時間はデジタル表示で、秒と分を切替可能。



デジタルタイマーを
装備。



押しやすい
ロック解除レバー。



マイクロチューブ各種に
対応。



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF-2	回転速度/最大遠心力:6,000rpm固定、2,000×g ^{*1} 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) ^{*2} タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分 ^{*3} マイクロチューブ架数:●0.2mL:シングル×8本または8連×2本/●0.5mL×8本/●1.5mLまたは2.0mL×8本 標準付属品:標準ローター×1個、0.2mL(8連)用ローター×1個、チューブアダプター(0.2および0.5mL用、各8個)	47,000円	35,250円

^{*1} 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。
^{*2} ローターが完全停止するまで、カバーを開けないでください。
^{*3} 本製品は簡易遠心機のため、実際には9999秒や9999分もの長時間の連続遠心を推奨するものではありません。
 ●販売中のシリーズ機種(Nichimate Flush Plus)とはカバーの高さが異なるため、同製品のコンパインド・ローターを本製品で使用することはできません。
 ●本製品は、液滴を簡単にスピンドウ(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

ディスプレイ遠沈管

NichimateAqua CentriTube

PP製のディスプレイ遠沈管。
キャップを締めきったことが感触で分かりやすい
"Locking Feel Screw"を採用。


30% OFF

サンプル
提供OK

サンプルご希望の方に
1袋お試しプレゼント!

※1部署・1研究室で1種類一袋まで
※数量限定 ※予告なく終了することがあります

Locking
Feel Screw
の凸部

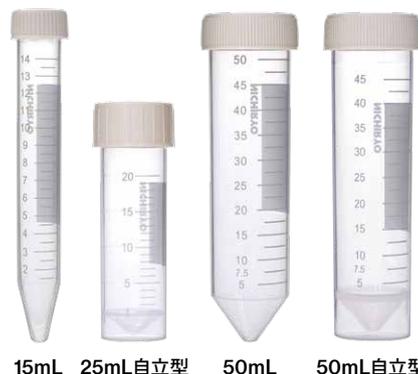

容量	製品コード	材質	滅菌	遠心強度	耐熱温度	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
15mL	00-AQA-CT-15	キャップ:PE チューブ:PP	電子線	7,800×g、20min	-25~ 121℃*	500本(50本×10袋)	20,000円	14,000円(28円)
25mL(自立型)	00-AQA-CT-25S			3,200×g、20min		600本(30本×20袋)	24,000円	16,800円(28円)
50mL	00-AQA-CT-50			7,800×g、20min		500本(25本×20袋)	27,000円	18,900円(37.8円)
50mL(自立型)	00-AQA-CT-50S			5,000×g、20min		500本(20本×25袋)	30,000円	21,000円(42円)

※本製品は凍結用の容器ではありません。-20℃程度でも、中に入れた液体の種類や量によってはひび割れや歪みが生じる場合があります。121℃・20分のオートクレーブ滅菌は可能ですが、変形や吹きこぼれを防ぐため、次の点に留意してください:キャップは極めて細く締め、中に液体を入れる場合は容量の30%までにする。新品を使用し、オートクレーブ滅菌は1回までとする。オートクレーブ滅菌したものは強度が低下している場合があるため遠心しない。
 ●本製品の「箱」は輸送時の保護のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。

専用FAX注文書詳細は裏面上部をご確認ください⇨



本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、
または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。

キャンペーンサイト URL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2022_0822.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

[専門FAX注文書]



オートクレーバブルマルチチャンネルマイクロピペット

Nichipet Air[®] マルチチャンネル

世界最高水準の精度・再現性を実現した
最軽量級マイクロピペット「Nichipet Air」の
マルチチャンネルモデル。



25% OFF

AC 滅菌可 デモ機 貸出OK

ドリームバンクポイント
8ch : 3points
12ch : 3points

製品コード(識別カラー)	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-10M8 (ピンク●)	8	可変式	0.5~10	±8.0*~±2.0	≤5.0*~≤1.0	105,000円	78,750円
00-NAR-100M8 (オレンジ●)			10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3		
00-NAR-200M8 (イエロー●)			20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3		
00-NAR-300M8 (ホワイト●)			30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NAR-10M12 (ピンク●)	12		0.5~10	±8.0*~±2.0	≤5.0*~≤1.0	115,000円	86,250円
00-NAR-100M12 (オレンジ●)			10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3		
00-NAR-200M12 (イエロー●)			20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3		
00-NAR-300M12 (ホワイト●)			30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		

*NAR-10M8、10M12の1μL以下の精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT:3,000円)。

NichimateAqua[™]

ローリテンションチップ&ローリテンションフィルターチップ

Low Retention Tip & Low Retention FilterTip

※在庫限りの商品です。在庫切れとなった場合はご了承ください。


撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。
粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。

UV Resistance

RNase/DNase FREE

Non-Pyrogenic Endotoxin FREE

サンプル提供OK

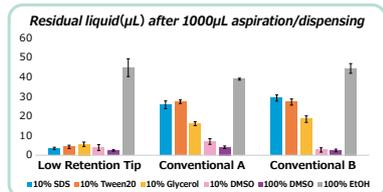

	容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	キャンペーン価格
フィルターなし	10μL	00-LRT-10RB	31.1mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	5,896円
	10μL(ロング)	00-LRT-10LRB	45.8mm			5,695円
	200μL	00-LRT-200RB	50.8mm			6,700円
	300μL	00-LRT-300RB	55.9mm			7,705円
	1250μL	00-LRT-1250RB	90.2mm			
フィルターあり	10μL	00-LRT-F10RB	31.1mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	9,750円
	10μL(ロング)	00-LRT-F10LRB	45.8mm			
	20μL	00-LRT-F20RB	50.8mm			
	100μL	00-LRT-F100RB				
	200μL	00-LRT-F200RB	90.2mm			
	300μL	00-LRT-F300RB				
	1250μL	00-LRT-F1250RB				

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。

●表示価格は消費税を含みません。 ●Nichipet Air、Nichimateは(株)ニチリョーの登録商標です。 ●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

