

2025.10.27 (月) ➡ 2026.1.16 (金)

Thanks! Fair 2026

マイクロピペットや
小型機器が
Max**40% OFF!!**

25% OFF

P.2



オートクレーパブルマイクロピペット
Nichipet Air シリーズ

30% OFF

P.3

NEW!



オートクレーパブルマイクロピペット
Nichipet EX III

MAX 40% OFF

P.4



オートクレーパブルマイクロピペット
Nichipet EX Plus II
NICHIRYO Le

MAX 25% OFF

P.4



マイクロピペット用
スタンド 各種

MAX 35% OFF

P.9

NEW!



ピペット
コントローラ
各種

23% OFF

P.9



ボトルトップ
ディスペンサー

MAX 25% OFF

P.10



小型簡易遠心機 各種

MAX 30% OFF

P.11



小型ブロック
インキュベーター 各種

25% OFF

P.12



スターラー 各種

30% OFF

P.12



マイクロプレート用
シェーカーインキュベーター

20% OFF

P.12



小型多機能
ローテーター

MAX 30% OFF

P.13



ボルテックスミキサー
各種

30% OFF

P.13



UV殺菌機能付き
ピペットスタンド

25% OFF

P.13



卓上小型
高圧蒸気滅菌器

25% OFF

P.14



アスピレーター 各種

チップなどの
各種消耗器が
Max**40% OFF!!**

MAX 40% OFF

P.5



ローリテンションチップ
(ラック入り、バルク、リフィル)

MAX 40% OFF

P.6



スタンダードチップ
(バルク、リフィル、空ラック)

35% OFF

P.7

NEW!



スタンダードチップ(ラック入り滅菌済み)

15% OFF

P.7



ゲルローディングチップ&
セルセーバーチップ

20% OFF

P.7



リザーバー (白色&透明)

28% OFF

P.8

NEW!



凍結保存用チューブ&
カラーキャップ

40% OFF

P.8



ディスポーザブル
セロロジカルピペット

30% OFF

P.8



ディスポーザブル遠沈管

30% OFF

P.8



マイクロチューブ
(1.5mL, 2.0mL)

お得にGet!



Nichipet Airくん

専用FAX注文書詳細は裏表紙上部をご確認ください➡

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet Air[®] シリーズ


本体重量及びストローク荷重の
軽量化により、長時間の作業による
疲労感やストレスを低減。
世界最高水準の性能を実現。

00-NAR-200M8

00-NAR-1000

マルチフィットノズル(マルチチャンネルのみ)

スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。

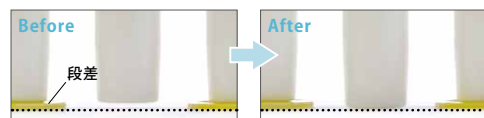

25% OFF

25% OFF

AC
減菌可

デモ機
貸出OK

シングルチャンネル
ドリームバンクポイント
1 point

マルチチャンネル
ドリームバンクポイント
8ch: 3 points
12ch: 3 points



カローセルスタンド

Nichipet Airシリーズの特長(一部抜粋)



専用治具で
簡単なキャリ
レーション。



最大70%(当社比)
低減したストローク
荷重。



手にフィット
しやすい形状。



ボディを
従来製品より
最大56%軽量化。
オートクレーブ
滅菌可能。




プッシュボタンから
容量可変ハンドル
を独立。
操作中の容量ズレ
を防止。



握ったときに
隠れない
ボリューム
インジケータ。



吐出性能を向上する
ハイパープロア
システムを搭載。
(対応モデル=NAR-2,
10,20,10M8,10M12)

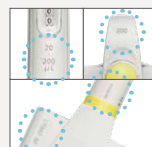

容量を複数カ所に
表記し、一目で
容量モデルの
識別が可能。
(シングルチャンネル:
3カ所、マルチチャ
ネル:4カ所)

■シングルチャンネル

製品コード(識別カラー)	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2(グレー●)	0.1~2	~±1.4*	~≤0.7*	42,000円	31,500円
00-NAR-10(ピンク●)	0.5~10	~±1.0*	~≤0.4*		
00-NAR-20(クリーム●)	2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3		
00-NAR-100(オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2		
00-NAR-200(イエロー●)	20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2		
00-NAR-1000(ブルー●)	100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2	45,000円	33,750円
00-NAR-5000(グリーン●)	500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15		
00-NAR-10000(ホワイト●)	1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15		

*NAR-2の0.2μL以下、NAR-10の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT:4,620円)。

■マルチチャンネル

製品コード(識別カラー)	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-10M8(ピンク●)	8	可変式	0.5～10	±8.0*～±2.0	≤5.0*～≤1.0	110,000円	82,500円
00-NAR-100M8(オレンジ●)			10～100	±3.0～±0.8	≤2.0～≤0.3		
00-NAR-200M8(イエロー●)			20～200	±3.0～±0.8	≤1.5～≤0.3		
00-NAR-300M8(ホワイト●)			30～300	±3.0～±0.8	≤1.0～≤0.3		
00-NAR-10M12(ピンク●)	12		0.5～10	±8.0*～±2.0	≤5.0*～≤1.0	120,000円	90,000円
00-NAR-100M12(オレンジ●)			10～100	±3.0～±0.8	≤2.0～≤0.3		
00-NAR-200M12(イエロー●)			20～200	±3.0～±0.8	≤1.5～≤0.3		
00-NAR-300M12(ホワイト●)			30～300	±3.0～±0.8	≤1.0～≤0.3		

*NAR-10M8、10M12の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT:4,620円)。

■カローセルスタンド

製品コード	適合ピペット/収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	Nichipet Airシリーズ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、NICHIRYO Le いずれも8本収納可能。	16,500円	12,375円

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EXⅢ

NEW!

国産マイクロピペットのスタンダード。
多くの研究者の手に馴染んできた
ベストセラーの最新モデル。

30% OFF

AC
滅菌可

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

ドリームバンクポイント
1 point



容量モデル毎に色分け(全8色)

00-NPX3-200

00-NPX3-1000

Nichipet EXⅢ 8つの特長(一部抜粋)



1. UV照射対応

高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。




2. ボディ

耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。



3. ロック機能

ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。

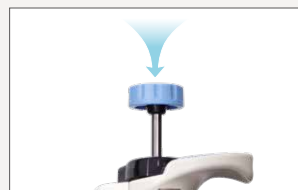

4. ピペッティング

従来製品よりストローク荷重を軽量化。長時間使用時の疲れを軽減。



5. ハイパーブローシステム

吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(2、10、20μL機種対応)



6. エジェクタパイプ

簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。



7. 容量モデル

2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。



8. ノズルフィルタ

ノズル先端にフィルタを採用。本体へ溶液の吸いこみを緩和。(1000、5000、10000μL機種対応)

製品コード(識別カラー)	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX3-2(グレー●)	0.1~2	~±1.5*	~≤0.7*	38,000円	26,600円
00-NPX3-10(ピンク●)	0.5~10	~±1.0*	~≤0.4*		
00-NPX3-20(クリーム●)	2~20	±5.0~±1.0	≤1.5~≤0.3		
00-NPX3-100(オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2		
00-NPX3-200(イエロー●)	20~200	±2.5~±0.6	≤0.7~≤0.2		
00-NPX3-1000(ブルー●)	100~1000	±3.0~±0.8	≤0.6~≤0.2	39,000円	27,300円
00-NPX3-5000(グリーン●)	500~5000	±2.4~±0.6	≤0.6~≤0.15		
00-NPX3-10000(ホワイト●)	1000~10000	±3.0~±0.6	≤0.6~≤0.15	43,000円	30,100円


※NPX3-2の0.2μL未満、NPX3-10の1μL未満における系統誤差・偶然誤差はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

UV殺菌可 カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EX Plus II

溶剤に対する耐薬品性に優れた
ニチペットシリーズ
有機溶媒、耐酸性対応モデル。

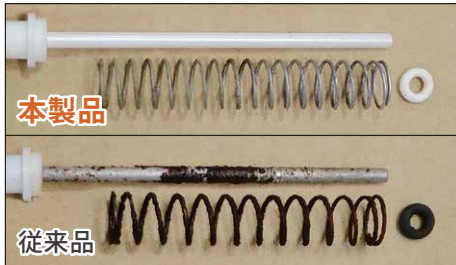

本製品

従来品

00-NPLO2-10

00-NPLO2-1000

30% OFF

AC
滅菌可

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

ドリームバンクポイント
1 point

【動画】
O-リング
耐薬性



製品コード	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPLO2-2	0.1~2	~±3.0*	~±1.0*	48,000円	33,600円
00-NPLO2-10	0.5~10	~±1.0*	~±0.5*		
00-NPLO2-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4		
00-NPLO2-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NPLO2-200	20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2		
00-NPLO2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2	55,000円	38,500円
00-NPLO2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2		
00-NPLO2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2		

* NPLO2-2の0.2 μL未満、NPLO2-10の1 μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

UV 殺菌可 カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線による劣化はありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

エルゴノミックマイクロピペット

NICHIRYO Le

デモ機
貸出OK

40% OFF

マイクロピペット用スタンド

Stand series

MAX
25% OFF

ドリームバンクポイント
1 point

83g台の超軽量ピペット。
お手軽価格の
スターターピペット。

00-NLE-200

00-NLE-1000

NEW!



マルチロータリースタンド



壁掛けスタンド

製品コード	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	0.5~10	~±1.2*	~±0.8*	19,000円	11,400円
00-NLE-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.5		
00-NLE-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NLE-200	20~200	±1.2~±0.8	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-1000	100~1000	±1.2~±0.7	≤0.8~≤0.5		

* NLE-10の1 μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

製品名／製品コード	適合ピペット／収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
マルチロータリースタンド 00-MLT-STD3	Nichipet EXⅢ、Nichipet Premium、 Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet EXⅡ、 MULTI シングル6本／マルチ3本収納可能。	11,000円	8,250円
壁掛けスタンド 00-NLE-STD	Nichipet Premium、Nichipet EXⅡ、 Nichipet EX PlusⅡ、NICHIRYO Le	2,500円	—

● 壁掛けスタンド(00-NLE-STD)は壁等に両面テープかねじで取り付ける方式です。

Low Retention Tip

Low Retention Filter Tip

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

MAX
40%
OFF

撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。
粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。

- 液切れに優れた、透明度の高いチップ。
- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- バルクとリフィルは未滅菌、ラック入りは滅菌済にてご提供。
- 空ラックの販売はございませんので、空ラックが必要な場合は滅菌済ラック入りチップをお買い求めください。



バルク



リフィル



ラック入り

	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
フィルターなし	10 μ L	31.1mm	00-LRT-10	バルク	1,000本	未滅菌	6,000円	3,600円(3.6円)
			00-LRT-10-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		11,000円	6,600円(6.88円)
			00-LRT-10RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	10,500円	8,925円(9.3円)
	10 μ L (ロング)	45.8mm	00-LRT-10L	バルク	1,000本	未滅菌	6,000円	3,600円(3.6円)
			00-LRT-10L-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		11,000円	6,600円(6.88円)
			00-LRT-10LRB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	10,500円	8,925円(9.3円)
	200 μ L	50.8mm	00-LRT-200	バルク	1,000本	未滅菌	5,000円	3,000円(3.0円)
			00-LRT-200-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		9,000円	5,400円(5.63円)
			00-LRT-200RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	10,500円	8,925円(9.3円)
	200 μ L (ロング)	91.1mm	00-LRT-200LRB	ラック入り	96本×2ラック	滅菌済	4,400円	3,740円(19.48円)
	300 μ L	55.9mm	00-LRT-300	バルク	1,000本	未滅菌	7,500円	4,500円(4.5円)
			00-LRT-300-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		12,000円	7,200円(7.5円)
			00-LRT-300RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	11,500円	9,775円(10.18円)
	1250 μ L	90.2mm	00-LRT-1250	バルク	1,000本	未滅菌	8,000円	4,800円(4.8円)
			00-LRT-1250-RF	リフィル	96本×4段×2セット(768本)		12,000円	7,200円(9.38円)
			00-LRT-1250RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	12,500円	10,625円(11.07円)

	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
フィルターあり	10μL 	31.1mm	00-LRT-F10RB	ラック入り	96本 × 10ラック	滅菌済	17,000円	12,750円(13.28円)
	10μL (ロング) 	45.8mm	00-LRT-F10LRB					
	20μL 	50.8mm	00-LRT-F20RB					
	100μL 		00-LRT-F100RB					
	200μL 		00-LRT-F200RB					
	200μL (ロング) 	91.1mm	00-LRT-F200LRB		96本× 2ラック		8,000円	6,000円(31.25円)
	300μL 	55.9mm	00-LRT-F300RB		96本 × 10ラック		17,000円	12,750円(13.28円)
	1250μL 	90.2mm	00-LRT-F1250RB					

NichimateAQUATip

※販売終了製品「Economy Tip」相当品です。

バルク、リフィル

バルク(袋入り)とリフィル(詰替)で提供される
コストリーズナブルなスタンダードチップ。

【バルク】

- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- UV照射耐性に優れています。

【リフィル】

- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- チップを載せた中板ごと交換するため、作業効率が格段に向上します。
- ラック入りチップを使い捨てるよりも経済的です。
- N10-RF、N200-RFは下記ラックN10RK、N10LRK、N200RKのいずれにも取り付け可能です。



バルク



リフィル



MAX
35%
OFF

AC
滅菌可

サンプル
提供OK

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

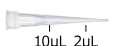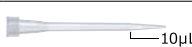容量／外形	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望 小売価格	キャンペーン価格 (単価)
10μL 	31.3mm	00-AQA-N10	バルク	1,000本	未滅菌	3,500円	2,275円 (2.28円)
		00-AQA-N10-RF	リフィル	960本 (96本×10段)		6,500円	4,550円 (4.74円)
10μL (ロング) 	48.0mm	00-AQA-N10L	バルク	1,000本		3,500円	2,275円 (2.28円)
200μL 	53.0mm	00-AQA-N200	バルク	1,000本			
		00-AQA-N200-RF	リフィル	960本 (96本×5段×2)		6,000円	4,200円 (4.38円)
1000μL 	81.9mm	00-AQA-N1000	バルク	1,000本		4,000円	2,600円 (2.6円)
		00-AQA-N1000-RF	リフィル	960本 (96本×5段×2)		7,500円	5,250円 (5.47円)

● いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問合せください。

ラック (透明PC製)

ニチメイトアクアチップ専用。

積み重ねやすいストレート形状。高い透明度のフタは取外し式。

- ポリカーボネート製のラックです (チップは付属しません)。
- オートクレーブ (121℃・20分) が可能です。
(必要以上にオートクレーブをかけると、変形などの現象が起こることがありますのでご注意ください。)
- UV照射耐性に優れています。
- コンパクトで積み上げやすい省スペース設計です。
- ケースが透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況の確認が簡単です。
- 蓋は取り外し式です (ヒンジ式ではありません)。



適合チップ	カラー	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
10μL	橙	00-AQA-N10RK	5個	6,500円	3,900円
10μLロング	赤	00-AQA-N10LRK			
200μL	黄	00-AQA-N200RK			
1000μL	青	00-AQA-N1000RK			

40%
OFF

AC
滅菌可

サンプル
提供OK

NichimateAqua™

スタンダードチップ (ラック入り滅菌済み)

NichimateAqua Marine Tip

NEW!


Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

35%
OFF

液切れの良い、
リーズナブルなスタンダードチップ。
ラック入り滅菌済み
パッケージでのご提供。

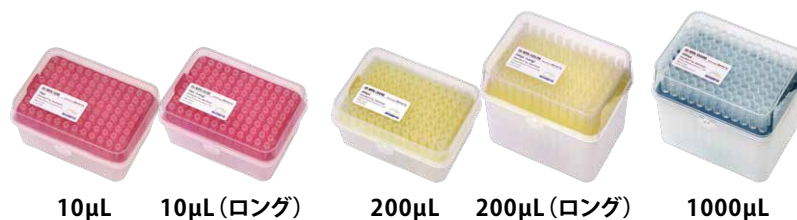

容量／外形	製品コード	長さ	パッケージ	入数	滅菌	希望 小売価格	キャンペーン価格 (単価)
10µL	00-MRN-10RB	32mm	ラック 入り	96本 × 10ラック	電子線 滅菌済	5,500円	3,575円 (3.72円)
10µL (ロング)	00-MRN-10LRB	46mm				7,000円	4,550円 (4.74円)
200µL	00-MRN-200RB	51mm				6,500円	4,225円 (4.4円)
200µL (ロング)	00-MRN-200LRB	90mm				7,500円	4,875円 (5.08円)
1000µL	00-MRN-1000RB	88mm					

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。

NichimateAqua™ ゲルローディングチップ

Gel-Loading Tip


スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいようデザインされたチップ。
先端形状は、極細ラウンド (円筒) タイプと極薄フラットタイプの 2 種類。

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

15%
OFF

容量		製品コード	長さ	パッケージ	入 数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
10μL(ラウンド)		00-GLT-10RB	51.7mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 2ラック	9,000円	7,650円(39.84円)
10μL(フラット)		00-GLT-10FRB				20,500円	17,425円(90.76円)
200μL(ラウンド)		00-GLT-200RB	82.6mm			9,000円	7,650円(39.84円)
200μL(フラット)		00-GLT-200FRB				20,500円	17,425円(90.76円)

NichimateAqua™ セルセーバーチップ

Cell Saver Tip

先端の開口部が広い (内径1.6mm) チップ。
細胞を極力傷つけないように吸引したい場合や、高粘度液体に最適。

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

15%
OFF

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望 小売価格	キャンペーン価格 (単価)
200µL	00-WBT-200RB	50.0mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	13,500円	11,475円 (11.95円)
1000µL	00-WBT-1000RB	71.1mm			19,000円	16,150円 (16.82円)

NichimateAqua™ リザーバー (白色PS製、透明PET製)

Reagent Reservoir

RV-100S
(白色PS製)

RV-PET50S
(透明PET製)

20%
OFF

サンプル
提供OK

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

(白色PS製)

(白色PS製)

容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格 (単価)
10mL	00-RV-10	白色 ポリス チレン	5個包装 滅菌済	5× 40個	30,000円	24,000円 (120円)
25mL	00-RV-25					
50mL	00-RV-50				33,000円	26,400円 (132円)
100mL	00-RV-100		個包装 滅菌済	100個	28,000円	22,400円 (224円)
10mL	00-RV-10S					
25mL	00-RV-25S					
50mL	00-RV-50S					
100mL	00-RV-100S					
50mL	00-RV-PET50S	ポリエチレン テレフタレート	個包装 滅菌済	50個	9,500円	7,600円 (152円)

NichimateAqua™

凍結保存用チューブ

NichimateAqua CryoVial

NEW!

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

28%
OFF


液体窒素の蒸気中(浸漬は不可)における
凍結保存に最適なチューブ。



カラーキャップインサート



アウター
キャップタイプ

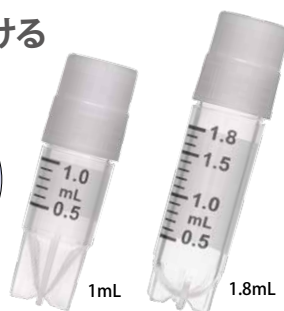

インナー
キャップタイプ



製品コード	容量 (mL)	タイプ	滅菌	材質	凍結保存環境	入数	希望小売 価格	キャンペーン価格 (単価)
00-AQA-CV-1SE	1.0	アウターキャップ (External thread)	電子線 (オートクレーブ不可)	キャップ:HDPE チューブ:PP O-リング:シリコン (O-リングはSPのみ)	液体窒素の 蒸気中 (浸漬は不可)	200本 (100本×2袋)	12,000円	8,640円(43.2円)
00-AQA-CV-2SE	1.8							
00-AQA-CV-1SP	1.0	インナーキャップ (Internal thread)				12,500円	9,000円(45円)	
00-AQA-CV-2SP	1.8							
00-AQA-CV-CC	カラーキャップインサート (数色の詰め合わせ)		なし (オートクレーブ不可)	PS		500個	6,500円	4,680円(9.36円)

●本製品は細胞懸濁液等を入れて別途プログラムフリーザー等で凍結した後に、液体窒素の蒸気中で凍結保存するための容器です。液体窒素中に浸漬することはできません。液体窒素に浸漬した場合、液体窒素が本製品の内部に侵入する場合があります。液体窒素が侵入した本製品を液体窒素保存容器から取り出すと、本製品内部に侵入した液体窒素が急激に膨張し本製品が破裂する危険性があります。本製品を液体窒素に浸漬して内容物を凍結させることは、絶対に行わないでください。●本製品は、オートクレーブ滅菌および遠心はできません。●目盛線や容量の印刷の濃さは個体差があります。

NichimateAqua™

ディスポーザブルセロロジカルピペット

Serological Pipette

滅菌済、個包装パッケージ。

DNase・RNase・パイロジェンフリー。

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

40%
OFF



製品コード	識別カラー	容量	容量精度	目盛間隔	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-SLP-1	黄●	1mL	±2%	0.01mL	ピペット: ポリスチレン フィルター: ポリエチレン および ポリエステル	300本	10,500円	6,300円(21円)
00-SLP-2	緑●	2mL		0.01mL		300本	11,500円	6,900円(23円)
00-SLP-5	青●	5mL		0.1mL		200本	10,500円	6,300円(31.5円)
00-SLP-10	橙●	10mL		0.1mL		200本	11,500円	6,900円(34.5円)
00-SLP-25	赤●	25mL		0.2mL		100本	10,500円	6,300円(63円)
00-SLP-50	黒●	50mL		0.5mL		100本	17,500円	10,500円(105円)

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管

Centrifuge Tube

遠心強度20,000×g。


キャップのシール性が高く、

耐熱・耐寒に優れる。

安心の国内製造、滅菌済。



キャップ上面はフラットな形状
書き込み可能

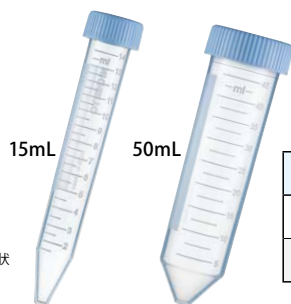

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

AC
滅菌可

サンプル
提供OK

30%
OFF

容量	製品コード	滅菌	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
15mL	00-ETS-CT-15	電子線	400本 (50本×8袋)	16,000円	11,200円 (28円)
50mL	00-ETS-CT-50		200本 (20本×10袋)	12,000円	8,400円 (42円)

NichimateAqua™

マイクロチューブ(キャップロックタイプ)

Micro Tube

ガードピンで片手操作時の

コンタミネーションリスクを低減。



AC
滅菌可

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

30%
OFF

タイプ	容量	製品コード	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
キャップ ロック	1.5mL	00-ETS-MC-15	1,000個	4,500円	3,150円 (3.15円)
	2.0mL	00-ETS-MC-20	1,000個	6,500円	4,550円 (4.55円)

手動式ピペットポンプ

Pipette Mate® eco

セロジカルピペットやメスピペット用の
使いやすい手動式ピペットポンプ。
電動タイプが苦手とする環境での
使用や試料(海水等)にも最適。

25%
OFF

デモ機
貸出OK



上部のラバーボール①を
握って潰してからレバー②
で吸引、吐出します。
丸い突起③はピペット先端
に残った液を吐き出すプ
ローアウトボタンです。

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-PMECO	吸引吐出容量:0.1~50mL 使用可能ピペット:1~100mL セロジカルピ ペット(メスピペット)、外径φ5~8mmのバスツ ールピペット等 フィルター:φ29mm、ポアサイズ3.0μm、疎水性 PTFE 外径寸法/重量:最大外径φ57×206Hmm(突起 部含まず)、約120g 標準付属品:フィルター(内部に取付済)	9,900円	7,425円

●本製品に、オートクレーブ滅菌できる部位はありません。

ピペットコントローラ(液晶表示付き)

Pipette Mate® Slim

吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、
吸引速度とバッテリー残量を
液晶画面で確認可能。

35%
OFF

デモ機
貸出OK



自立スタンド(別売)
(00-PMSLM-OP1)

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-PMSLM	使用可能ピペット:1~100mL セロジカルピペット (メスピペット)、外径φ5~8mmのバスツールピペット等 吸引/吐出:吸引速度は6段階、吐出速度は一定(ボタ ンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替) バッ テリー:リチウムイオン充電電池(取り出し不可、交換をご 要望の場合は販売店にご連絡ください) 標準付属品: 壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備	56,000円	36,400円

●交換用部品:壁掛けスタンド(00-PMSLM-RP1、1,540円)、フィルター(00-PMSLM-RP2、4,620円)、充電器(00-PMSLM-RP3、6,930円)、ピペットホルダー(00-PMSLM-RP4、2,310円)、ノーズコーン(00-PMSLM-RP5、5,390円)。

■オプション:自立スタンド

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格
00-PMSLM-OP1	パネルの色がブルーのPipette Mate Slimで使用する着脱式の自立 スタンド。	5,500円

ピペットコントローラ

Pipette Mate® NEO


UV耐性でクリーンベンチ内での使用にも最適。
軽量(約167g)で操作性に優れた
スタンド不要の自立型。

35%
OFF

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

ドリームバンクポイント
1 point

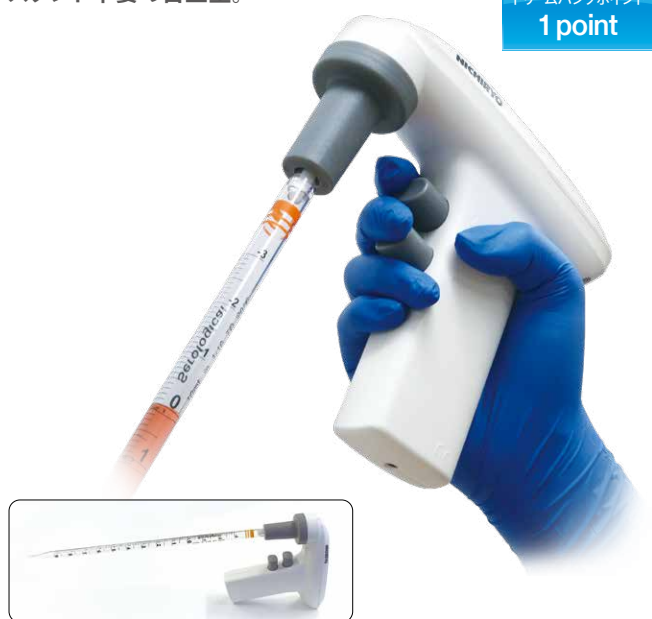

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-PMNEO	使用可能ピペット:ガラス製およびプラ スチック製(1~100mL)	59,000円	38,350円

オートクレーバブルボルトトップディスペンサー

DISPET EXII

各種標準試薬瓶にセット可能な
ボルトトップディスペンサー。
オートクレーブ滅菌
(121℃、20分)が可能。

23%
OFF

AC
滅菌可

ドリームバンクポイント
1 point



【耐薬性
一覧】

製品コード	分注容量 (mL)	目盛単位 (mL)	精度 (%)	再現性 (%)	本体 ねじ口	付属 アダプタ サイズ	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-DPX2-20	0.2~2.0	0.05	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28	79,000円	60,830円
00-DPX2-50	0.5~5.0	0.10	±0.5	≤0.1		GL-32	99,000円	76,230円
00-DPX2-100	1.0~10.0	0.2	±0.5	≤0.1		GL-38	110,000円	84,700円
00-DPX2-250	2.5~25.0	0.5	±0.5	≤0.1			140,000円	107,800円
00-DPX2-500	5.0~50.0	1	±0.5	≤0.1				
00-DPX2-1000	10.0~100.0	2	±0.5	≤0.1				

小型簡易遠心機(デジタルタイマー付き)

Nichimate Flush II

タイマー運転のほか、カバー開閉で
回転ON/OFFも可能。
アダプターとローター交換で、
マイクロチューブ各種に対応。

- 回転速度は6,000rpm固定
(最大遠心力2,000×g)。
- ローター2種とアダプターで、
各種マイクロチューブに対応。
- タイマー時間はデジタル表示で、
秒と分を切替可能。



マイクロチューブ
各種に対応



デジタルタイマーを
装備



押しやすい
ロック解除レバー



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF-2	回転速度/最大遠心力: 6,000rpm固定、2,000×g ^{※1} 回転開始/停止操作: カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) ^{※2} タイマー時間設定範囲: 0~9999秒/1~9999分 ^{※3} マイクロチューブ架数: ●0.2mL: シングル×8本または8連×2本 / ●0.5mL×8本 / ●1.5mLまたは2.0mL×8本 標準付属品: 標準ローター×1個、0.2mL(8連)用ローター×1個、 チューブアダプター(0.2および0.5mL用、各8個)	55,000円	41,250円

※1. 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。 ※2. ローターが完全停止するまで、カバーを開けないでください。 ※3. 本製品は簡易遠心機のため、実際には9999秒や9999分の長時間の連続遠心を推奨するものではありません。
●販売中のシリーズ機種(Nichimate Flush Plus)とはカバーの高さが異なるため、同製品のコンバインド・ローターを本製品で使用することはできません。
●本製品は、液滴を簡単にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

小型簡易遠心機

Nichimate Flush

カバー開閉で回転ON/OFFが可能。
付属のアダプターやローター交換で
5種類のマイクロチューブに対応。



0.2mL用ローター

1.5/2.0mL用ローター

製品コード	最大回転数	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	6,000r/min (2,000×g)	●1.5/2.0mL×8本 ●0.2mL×8本(付属アダプター使用) ●0.2mL(8連)×4本(付属ローターに交換) ●0.5mL×8本(付属アダプター使用)	63,000円	50,400円



20% OFF

デモ機
貸出OK

小型簡易遠心機(回転速度可変式)

Nichimate Flush Plus

回転速度可変式
(3,000~10,000rpm)。
タイマー運転のほか、
カバー開閉で回転ON/OFFも可能。
コンバインド・ローターで、
ローター交換不要。



タイマー時間は
秒と分を切替可能

カバーのロック解除は、軽く
レバーを押下げるだけ

コンバインド・
ローター



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF+	回転速度範囲: 3,000~10,000rpm(設定単位: 1,000rpm) ^{※1} 最大遠心力(RCF): 500~5,600×g ^{※1} 回転開始/停止操作: カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) ^{※2} タイマー時間設定範囲: 0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 使用可能容器と最大架数 ^{※3} : 0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)、シングル×16(24)本または8連×2本、 0.5mLマイクロチューブ×8(16)本、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 ^{※4} 標準付属品: コンバインド・ローター×1個(取付済)、0.2mL用チューブアダプター×8個、 0.5mL用チューブアダプター×8個	77,000円	57,750円

※1. 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間(1日に1時間、年に200日使うとして約5年)です。 ※2. カバーのロックをはずすとローターの回転停止が始まりますが、完全停止するまではカバーを開けないでください。 ※3. カッコ内の本数は、チューブアダプターを使用した場合の最大架数です。この場合の本数を同時に載せることはできません。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにてしてください。 ※4. ネジロタイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。
●遠心時は、重量バランスが偏らないようにマイクロチューブ(試料)を載せてください。 ●本製品は、液滴を簡単にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

空冷ファン付き小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath II

空冷ファンにより、使用中の温度を
低い温度に変更した際の降温時間を短縮。
超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度※。

※ブロック温度:20℃ → 100℃が15分以下

空冷ファンの効果

約21℃の室温下において、ブロック温度が
100℃から37℃に下がるまでに要する時間を計測。

00-NDB (旧製品)…約60分 00-NDB-2 (本製品)…約20分



30% OFF

デモ機
貸出OK




本体底面の
空冷ファン

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB-2	使用温度範囲※:室温+5℃~+100℃ (冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ブロック温度調節精度※: +100℃時: ≤±0.5℃、+40℃時: ≤±0.3℃ ブロック温度移行速度※: +20℃ → +100℃: ≤15min 使用環境温度範囲: +4℃~+35℃ 温度プログラム運転: 2セグメントプログラムを9個保存可能 (温度メモリー的な使用も可能) 電源 (ACアダプタ): 100-240V、1.2A	79,000円 (ブロック別売)	55,300円 (ブロック別売)

※使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。●空冷ファンは、設定温度や現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。●写真の容器は付属しません。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	21,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	21,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

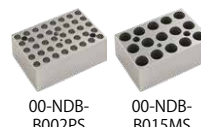

小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath Plus / Cool

超コンパクトサイズ。
小型ならではの速い温度移行速度。
サーモリッドは試料の蒸発を低減。

MAX
30% OFF

デモ機
貸出OK

サーモリッドなし(ドライバス)



サーモリッドあり(ドライバスプラス)



サーモリッドの効果

使用条件にもよりますが、
+65℃程度まで容器内の
結露をほぼ抑えることが
できます (写真はシリーズ機
種のドライバスプラスにお
いて+65℃設定時、弊社通
常ドライバスと比較)。また、
試料への環境温度の影響
を低減します。



00-NDB+
ドライバス・プラス




00-NDB-C
ドライバス・クール

製品タイプ	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
加熱・サーモリッド	00-NDB+	温度範囲: 室温+5℃~+100℃ (+20℃→+100℃ ≤15min)	89,000円 (ブロック別売)	66,750円 (ブロック別売)
加熱・冷却・サーモリッド	00-NDB-C	温度範囲: 室温-25℃~+100℃※ (+20℃→+100℃ ≤15min、+26℃→+4℃ ≤30min)	165,000円 (ブロック別売)	115,500円 (ブロック別売)

※室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で-10℃まで。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしクールの冷却時にはOFFになります。●写真の容器は付属しません。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	21,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	21,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

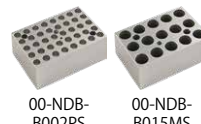

超小型スターラー／小型スターラー

Nichimate Stirrer

超小型の攪拌容量は1.5Lまで、小型の攪拌容量は3Lまで。



25% OFF

デモ機
貸出OK

攪拌イメージ
容器は付属しません

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
超小型スターラー 00-NS-1L	回転速度(※):100~1500rpm (アナログ無段階、表示なし) 攪拌可能な最大容量(※)/許容容器サイズ:1.5L (水の場合)、外径Φ90mmまで	39,000円	29,250円
小型スターラー 00-NS-3L	回転速度(※):200~2000rpm (デジタル表示あり) 攪拌可能な最大容量(※)/許容容器サイズ:3L (水の場合)、外径Φ140mmまで		

※攪拌する液体の粘度、容器の材質や肉厚等により、仕様を満たさない場合があります。

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター

Nichimate PlateShaker

マイクロプレート2枚用の

手軽なシェーカーインキュベーター。

温度精度に優れるヒーターで上下から加温。

3mm振幅で96ウェルを確実に攪拌。



スプリングホルダー
(振とう台)



【96ウェルの
攪拌】



30% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	振とう速度/振幅:200~1200rpm、3mm 使用温度範囲※1:室温+5℃~+70℃ (設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ヒーター温度調節精度※1:±0.5℃ (+37.0℃設定時:±0.3℃) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用可能容器:マイクロプレート (SBS規格) ×2枚※2 電源:AC100~240V (3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません)※3	239,000円	167,300円

※1. 容器および試料がない (環境温度以外の温度的な負荷がない) 場合の値です。なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。 ※2. 十分な攪拌ができるのは96ウェルまでです。また、試料が1枚分のみであっても、空のマイクロプレートを用いて常に2枚を取り付けてください。なお、マイクロプレートはSBS規格に準じた多くのブランドが使用可能ですが、大切な試料を損なうことがないよう、あらかじめ空のマイクロプレートを用いて着脱の感覚や固定の具合を確かめておくことをお勧め致します。 ※3. 電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。2Pコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator

ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・シーソー・間欠回転も。

容器ホルダー全種が標準付属。



4種の付属ホルダーで
下記の容器架数となり
ます (小は各2個付属)。

【動作の
様子】



20% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	振とうモード	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT	・Rotate (回転※) 5~70r/min ・Mix (間欠回転※+微震動) 5~30r/min ・Pause (間欠回転※) 5~35r/min ・Rock (シーソー) 2~10r/min ※回転は容器の取付方向によって転倒攪拌になります。	・0.5mL マイクロチューブなら24本 ・1.5/2.0mL マイクロチューブなら11本×2 ・φ12~13mm (5mLや7mL) チューブなら5本×2 ・15mL ディスポーザブル管なら5本×2 ・50mL ディスポーザブル管なら6本	139,000円	111,200円

超小型ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer-mini

手のひらサイズ、簡単操作。

50mLディスポ遠沈管(容量30mL)まで撹拌が可能。

30% OFF



デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMXM	震動速度(※)/振幅/運転モード:3000rpm 固定、4.5mm、タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量(※):50mLディスポ遠沈管 に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法及び重量:93×93×72mm、約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz	27,000円	18,900円

※撹拌する液体の粘度、容器の持ちかたや当てかた、設置場所の状態により、仕様を満たさない場合があります。滑りやすい場所や本製品のゴム足に埃が付着している場合は、50mLディスポ遠沈管を撹拌した際に本製品が滑り動く場合があります。

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer


強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。

50mL遠沈管なら液量が40mLでも確実に撹拌。

20% OFF



別売のフラットホーム

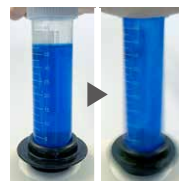

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX	震動速度:200~3,000r/min	65,000円	52,000円
00-NMX-F	フラットホーム:凹凸がついた平らで広いヘッド	15,000円	—

UV殺菌機能付きピペットスタンド

Nichimate UV Carousel

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。

28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。

マイクロピペットをクリーンな状態に保つことが可能。

30% OFF



【実験データ】



マイクロピペットは付属しません。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NUVC-6	マイクロピペット架数: シングル6本(1000μLまで)※ 殺菌灯:UV-C、寿命約2000時間、 1回の運転:28min	110,000円	77,000円

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください。(いずれのブランドにおいても5000および10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません)。●殺菌灯は中央にあり、チャンバー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。●本製品の殺菌灯は一般的な水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

Nichimate AutoClave


マイクロピペットのノズル内部も滅菌。

滅菌から乾燥まで全自動。

100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽に。

25% OFF

デモ機
貸出OK

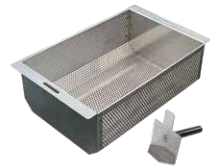

別売バスケット

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAC-1	滅菌温度:121℃(20~90分)/132℃(5~90分) 乾燥温度:約100℃(0~90分)、送風機能あり 給水:本体上面から供給、約2.8L 電源:AC100V、1.44kw(3Pコンセント)	650,000円 (バスケット別売)	487,500円 (バスケット別売)

●本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規格である「簡易」容器です。●ドアパッキンおよびエアントフィルタは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

■別売部品：バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格
00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属。 内寸:185(149)×270×99mm	60,000円

大容量超強力アスピレーター


Nichimate ASPIRATOR III

ハンドオペレーターと各種ノズル／アダプターが標準付属ですぐに使える、フットスイッチも備えた大容量超強力モデル。吸引速度は調節可能。

25% OFF

デモ機
貸出OK

ハンドオペレーターその他、ステンレスニードルノズルやマイクロビペットのチップが使用できるアダプターが付属します。

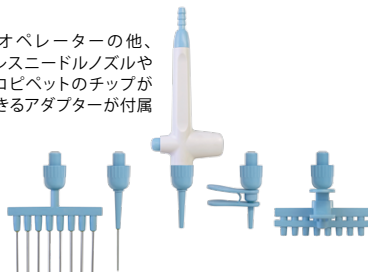

廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-3	吸引速度：～26L/min (空気における値)、真空度調節範囲：0～600mmHg (0～80kPa)、廃液容量：約2.5L、電源：AC100V、主な付属品：フットスイッチ×1、エアフィルター×1、リザーバー（キャップおよびガラス瓶）×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	145,000円	108,750円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル／チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロビペット用チップ（200～300μL）は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ＝00-NASP-3-RP2：7,400円、ボトル（ガラス瓶）＝00-NASP-3-RP3：7,400円。

強力アスピレーター（デジタルタイプ）


Nichimate ASPIRATOR II

小型ながら最大8L/minの吸引力。
吸引力をデジタルで調節可能。
廃液リザーバーにはオーバーフロー防止機構あり。

25% OFF

デモ機
貸出OK

ハンドオペレーターその他、ステンレスニードルノズルやマイクロビペットのチップが使用できるアダプターが付属します。

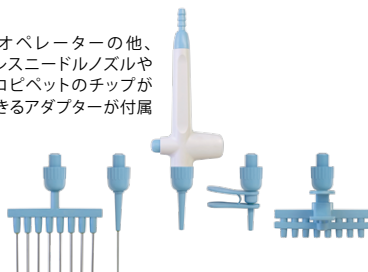

廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-2	吸引速度：～8L/min (空気における値)、真空度調節範囲：-30～-650mbar (-0.003～-0.065MPa)、廃液容量：約1000mL、主な付属品：ノズルアダプターホルダー×1、エアフィルター×1、リザーバー（キャップおよびポリ瓶）×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	125,000円	93,750円

ニチリョーのマイクロピペット バリデーションサービスのご案内

ニチリョーでは各社製品のJCSS校正サービスを実施しております。※対象メーカーに関しましては下記表をご参照ください。

あなたは
どのコース?

START

どちらのマイクロピペットになりますか?

これから購入する製品

使用中の製品

修理および調整も行いますか?

YES

NO

どの発行書類が必要ですか?

JCSS校正証明書も
欲しい
(3点、10回測定を希望)

検査成績書
だけで良い
(2点、6回測定を希望)

どの発行書類が必要ですか?

JCSS校正証明書も
欲しい
(3点、10回測定を希望)

検査成績書
だけで良い
(2点、6回測定を希望)

調整前の校正も
欲しい

NO

YES

調整前の検定も
欲しい

NO

YES

どの発行書類が必要ですか?

JCSS校正証明書も
欲しい
(3点、10回測定を希望)

検査成績書
だけで良い
(2点、6回測定を希望)

シングル	J-A	N-A	J-B	J-C	N-B	N-C	J-D	N-D	シングル
マルチ 8ch	J-A8	N-A8	J-B8	J-C8	N-B8	N-C8	J-D8	N-D8	マルチ 8ch
マルチ 12ch	J-A12	N-A12	J-B12	J-C12	N-B12	N-C12	J-D12	N-D12	マルチ 12ch

● J:JCSS校正サービス (マイクロピペット)

対象メーカー	コース	A	B	C	D
NICHIRYO		・出荷時のみ適用 ・合格判定は メーカー精度基準	・点検/修理/調整の 後の校正のみ ・合格判定は メーカー精度基準	・点検/修理/調整の 前後で校正 ・合格判定は ISO-8655-2基準	・調整なしで校正のみ ・合格判定は ISO-8655-2基準
GILSON, Eppendorf, Thermo Fisher SCIENTIFIC, METTLER TOLEDO, SARTORIUS					

種 類	サービス コード	料金 (税別)	校 正		修理・ 容量調整	発 行 書 類	合否判定基準	測定 回数	校正容量 ※表示容量範囲を 基準とする				
			調整前	調整後									
シングル	J-A	13,500円	○	－	－	JCSS 校正 証明書 ＋ 検査 成績書 ＋ TEST REPORT	メーカー精度	10 回	・最大値 ・50% ・最小値 (または10%)				
	J-B	18,500円	－	○	○		メーカー精度						
	J-C	31,000円	○	○	○		ISO-8655-2						
	J-D	13,500円	○	－	－		ISO-8655-2						
マルチ 8 チャンネル	J-A8	28,000円	○	－	－		メーカー精度			10 回	・最大値 ・50% ・最小値 (または10%)		
	J-B8	36,000円	－	○	○		メーカー精度						
	J-C8	62,000円	○	○	○		ISO-8655-2						
	J-D8	28,000円	○	－	－		ISO-8655-2						
マルチ 12 チャンネル	J-A12	41,000円	○	－	－		メーカー精度					10 回	・最大値 ・50% ・最小値 (または10%)
	J-B12	49,000円	－	○	○		メーカー精度						
	J-C12	88,000円	○	○	○		ISO-8655-2						
	J-D12	41,000円	○	－	－		ISO-8655-2						

● N:検定サービス (マイクロピペット)

対象メーカー	コース	A	B	C	D
NICHIRYO		・出荷時のみ適用 ・合格判定は メーカー精度基準	・点検/修理/調整の 後の検定のみ ・合格判定は メーカー精度基準	・点検/修理/調整の 前後で検定 ・合格判定は ISO-8655-2基準	・調整なしで検定のみ ・合格判定は ISO-8655-2基準

種 類	サービス コード	料金 (税別)	検 定		修理・ 容量調整	発 行 書 類	合否判定基準	測定 回数	検定容量 ※表示容量範囲を 基準とする	
			調整前	調整後						
シングル	N-A	4,500円	○	－	－	検査 成績書 ＋ TEST REPORT	メーカー精度	6 回	・最大値 ・最小値 (または10%)	
	N-B	9,500円	－	○	○		メーカー精度			
	N-C	13,000円	○	○	○		ISO-8655-2			
	N-D	4,500円	○	－	－		ISO-8655-2			
マルチ8 チャンネル	N-A8	9,000円	○	－	－		メーカー精度			
	N-B8	17,000円	－	○	○		メーカー精度			
	N-C8	25,000円	○	○	○		ISO-8655-2			
	N-D8	9,000円	○	－	－		ISO-8655-2			
マルチ12 チャンネル	N-A12	13,000円	○	－	－		メーカー精度			
	N-B12	21,000円	－	○	○		メーカー精度			
	N-C12	33,000円	○	○	○		ISO-8655-2			
	N-D12	13,000円	○	－	－		ISO-8655-2			

※ニチリョー製品以外の修理は簡易メンテナンスとなります。交換パーツが必要な修理は行えませんので、修理せずそのまま返却いたします。他社製品のJCSS校正サービスをご希望の場合は、一度お問い合わせください。

● Nichipet Premium/Nichipet Premium LTの5年保証期間中は、J及びNともにB/Cコースの場合、料金(シングル)から5,000円お値引きさせていただきます(同製品は2025年10月現在、シングル機種のみとなっています)。● J及びNともB/Cコースに関して、製品の損傷がひどい場合は修理費用を別途5,000円頂く場合がございますのでご了承ください。(該当した場合は事前にご連絡いたします)。● 容量固定式ピペットの校正及び検定は表示容量のみとなります。● トレーサビリティ体系図(常用参照標準校正証明書)をご要望の場合は、別途料金(5,000円)を申し受けます。● J-C/N-Cコースにおいて、調整前校正(調整前検定)が完了した後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。● 納期はJおよびNともにA/B/Dコースが受注確定後6営業日、Cコースが受注確定後12営業日となります(ただし本数によっては納期をご相談させて頂く場合があります)。● ドリム/バンクポイントが付与されるのは、Jの各コースのみです。● マルチチャンネルピペットは全チャンネルを測定し、書類を発行致します(ただし、0.5~10μLの容量モデルは両端と真中の3チャンネルの測定となります)。

当社校正サービスセンターは認定基準としてISO/IEC17025(JISQ17025)を用い、認定スキームをISO/IEC17025に従って運営されるJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社校正サービスセンターは国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0280は当社校正サービスセンターの認定番号です。



ご注文方法

本キャンペーン対象製品のご注文は**専門FAX注文書**にて承ります

[専門FAX注文書]

弊社ホームページTOP画面に掲載している**キャンペーンバナー**、**右のQRコード**、
または、**下記URLより注文書をダウンロード**の上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。



キャンペーンサイトURL: https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2025_1027.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。

ドリームバンク会員募集中!

ニチリョードリームバンクとは、製品をお使い頂いているお客様にポイントサービスや
定額制の修理などお得で便利なサービスをご提供している無料会員サービスです。
その他、会員様限定のキャンペーン情報を配信させていただきます。

●ポイントサービス...製品に応じてご購入時にドリームバンクポイントが付与されます。ドリームバンクポイントを貯めると、
製品の交換や修理を行うことができます。(ポイント付与例: Nichiept EX II を 1 本ご購入: 1pt)

Dream Bank

新規会員登録はこちら➡

ニチリョー ドリームバンク 🔍



ポイント登録方法

製品の中に右記ポイントカードが同封されています。こちらに記載されている
シリアルナンバーをご自身の会員ページにてご入力ください。

シリアル
ナンバー ➡



Point1 ポイント交換

貯めたポイントをマイクロピペット・消耗品
などの製品と交換することができます。



※対象製品、または交換必要ポイント数については予告なく変更する場合があります。

Point2 ポイント修理

貯めたポイントでマイクロピペットおよび
ディスペンサーの修理を行うことができます。

3pointで修理可能な商品

- Nichipet Air ●Nichipet EXII
- Nichipet EX PlusII ●Nichipet Premium
- Nichipet Premium LT ●NICHIRYO Le
- Nichipet FII&VII

5pointで修理可能な商品

- Nichipet Air (マルチチャンネル)
- Nichipet EX II MULTI ●Nichimate Stepper
- MODEL 8100 ●MODEL 8800
- Pipettemate NEO

※専用の修理依頼書が必要になります。

Point3 おまかせ修理

どんな症状でも基本料金のみで
マイクロピペットを修理することができます。
定額制のため、お見積りが不要です。
交換パーツはすべて無償です。

シングルチャンネル...5,500円

- Nichipet Air ●Nichipet EXII
- Nichipet EX PlusII ●Nichipet Premium
- Nichipet Premium LT ●NICHIRYO Le
- Nichipet FII&VII

マルチチャンネル...8,500円

- Nichipet Air (マルチチャンネル)
- Nichipet EXII MULTI

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。 ●ご記入頂きました個人情報、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。 ●表示価格は消費税を含みません。 ●"Nichipet Air"および"ニチベットエアー"、"Nichimate"および"ニチメイト"、"Pipette Mate"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。 ●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。 ●本製品の「箱」は輸送時の保護用のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。

