

2026.1.13 (火) ➡ 2026.3.31 (火)

ご好評につき

第2弾

Thanks! Fair 2026

30% OFF

AC
滅菌可

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK


ドリームバンクポイント
1 point

ラックチップ
プレゼントキャンペーン
対象製品
※詳細は裏表紙をご確認ください。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EX Plus II

溶剤に対する耐薬品性に優れた
ニチペットシリーズ有機溶媒、耐酸性対応モデル。

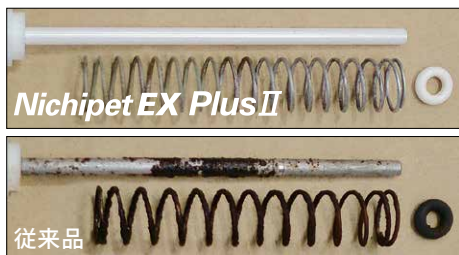

錆びないセラミックプランジャを採用
(20 μ L以上の機種)。腐食しにくい特
殊合金製スプリングで耐薬品性をさらに
向上(左の写真は酸で腐食した通常
の金属製のプランジャとスプリング)。

【動画】
Oリング耐薬品性



パーフロゴム製Oリング耐薬品性の例

パーフロゴムは、従来使用が困難であった有機酸、アルカリ、アンモニア水、エステル、フラン、アミンに
対しても体積増加が少なく、Oリングとしての性能は格段に上がります。

薬品名称		薬品 温度	試験 日数	パーフロ ゴム	従来の フッ素ゴム	薬品名称		薬品 温度	試験 日数	パーフロ ゴム	従来の フッ素ゴム
鉱酸・有機酸	水酢酸	40℃	21	A	C	アルコール類	メチルアルコール	40℃	21	A	B
無機アルカリ類	アンモニア水 28%	40℃		A	D		エチルアルコール	40℃		A	B
フラン・アルデヒド類	アセトアルデヒド	25℃		B	D	その他 油・スチーム類	ファイアークエル	130℃		A	B
含窒素化合物類	N, N' - ジメチル ホルムアミド	40℃		A	D		アセトン	40℃		B	D
炭化水素・ハロゲン化 炭化水素類	クロロホルム	40℃		B	B	ケトン・ エステル・ エーテル類	ジエチルエーテル	25℃		B	C

A: 体積膨張率 5%未満…使用上全く問題なし B: 体積膨張率 5% - 20%…使用上問題なし C: 体積膨張率 20% - 50%…使用は条件付き D: 体積膨張率 50%以上…使用不可


製品コード	容量範囲 (μ L)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPLO2-2	0.1~2	$\sim \pm 3.0$ ※	$\sim \leq 1.0$ ※	48,000円	33,600円
00-NPLO2-10	0.5~10	$\sim \pm 1.0$ ※	$\sim \leq 0.5$ ※		
00-NPLO2-20	2~20	$\pm 5.0 \sim \pm 1.0$	$\leq 3.0 \sim \leq 0.4$		
00-NPLO2-100	10~100	$\pm 2.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.3$		
00-NPLO2-200	20~200	$\pm 1.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 0.5 \sim \leq 0.2$		
00-NPLO2-1000	100~1000	$\pm 1.0 \sim \pm 0.7$	$\leq 0.5 \sim \leq 0.2$	55,000円	38,500円
00-NPLO2-5000	1000~5000	$\pm 1.0 \sim \pm 0.6$	$\leq 0.3 \sim \leq 0.2$		
00-NPLO2-10000	1000~10000	$\pm 2.0 \sim \pm 0.4$	$\leq 0.4 \sim \leq 0.2$	64,000円	44,800円

※NPLO2-2の0.2 μ L未満、NPLO2-10の1 μ L未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。



カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

専用FAX注文書詳細は裏表紙上部をご確認ください➡

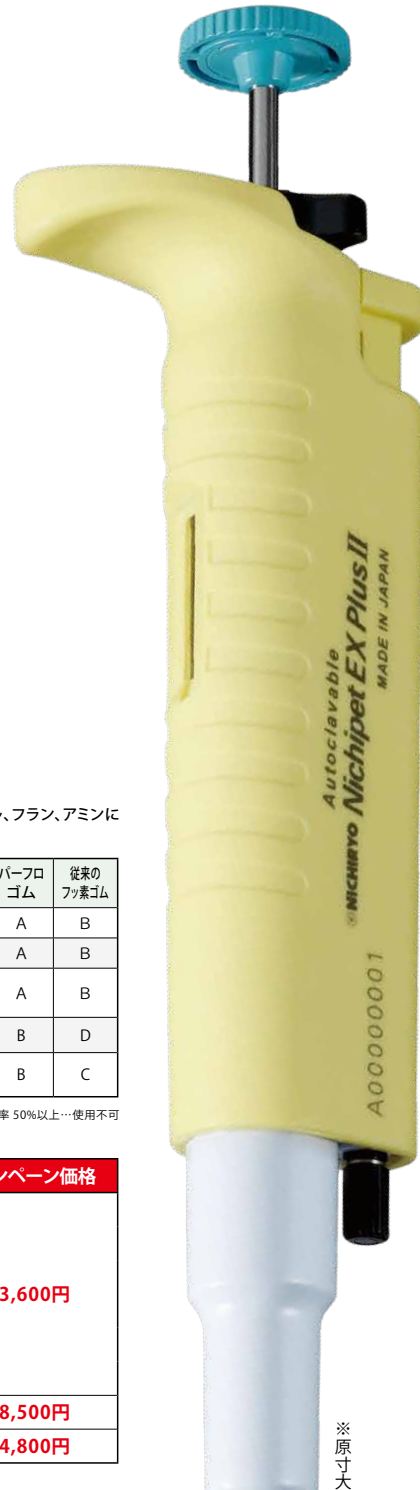

※原寸大

25% OFF

AC
滅菌可

デモ機
貸出OK

ドリームバンクポイント
1 point

まとめ買い
プレゼントキャンペーン
対象製品
※詳細は裏表紙をご参照ください。


ローリテンションチップ
プレゼントキャンペーン
対象製品
※詳細は裏表紙をご参照ください。

オートクレーパブルマイクロピペット


Nichipet Air[®]

本体重量及びストローク荷重の軽量化により、
長時間の作業による疲労感やストレスを低減。
世界最高水準の精度・再現性を実現。

■ストローク荷重 他社製品比較 (1000 μ L)

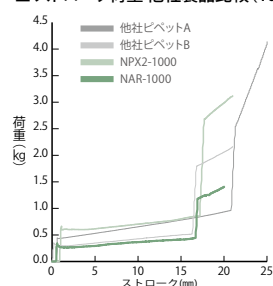

■本体重量 他社製品比較 (10000 μ L)

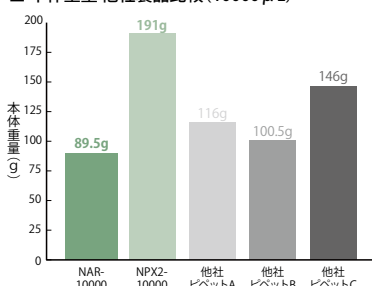

カローセルスタンド

Nichipet Air 6つの大きな特長 (一部抜粋)

Point 1 イージーキャリブレーション

専用治具により、
容量測定値に目
盛を合わせるだけ
で調整が可能。



Point 2 ピペッティング

従来製品よりスト
ローク荷重が最大
70%軽減。



Point 3 ボディ

ボディが細くなり操作
性がアップ。耐久性を
そのままに、従来製品
より最大56%軽量化、
約70gを実現。



Point 4 エジェクタ

ワンタッチで脱着
でき、細い試験管
などに対応。



Point 5 スムーズな容量設定

プッシュボタンから
容量可変ハンドル
を独立。操作中の
容量ズレを防止。



Point 6 ハイパーブローシステム

吐出性能が格段
に向上。吐出時の
チップ内液残りを
解消。(2、10、20 μ L
機種対応)



製品コード (識別カラー)	容量範囲 (μ L)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2 (グレー ●)	0.1~2	$\sim \pm 1.4^*$	$\sim \leq 0.7^*$	42,000円	31,500円
00-NAR-10 (ピンク ●)	0.5~10	$\sim \pm 1.0^*$	$\sim \leq 0.4^*$		
00-NAR-20 (クリーム ●)	2~20	$\pm 3.0 \sim \pm 1.0$	$\leq 1.5 \sim \leq 0.3$		
00-NAR-100 (オレンジ ●)	10~100	$\pm 3.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.2$		
00-NAR-200 (イエロー ●)	20~200	$\pm 1.8 \sim \pm 0.6$	$\leq 0.7 \sim \leq 0.2$		
00-NAR-1000 (ブルー ●)	100~1000	$\pm 1.0 \sim \pm 0.6$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.2$	45,000円	33,750円
00-NAR-5000 (グリーン ●)	500~5000	$\pm 2.0 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.15$		
00-NAR-10000 (ホワイト ●)	1000~10000	$\pm 2.0 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.15$		

※ NAR-2の0.2 μ L以下、NAR-10の1 μ L以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT:4,620円)。

■カローセルスタンド

製品コード	適合ピペット/収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	Nichipet Airシリーズ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、NICHIRYO Le いずれも8本収納可能。	16,500円	12,375円

※ 原寸大

25% OFF

AC
減菌可

デモ機
貸出OK

ドリームバンクポイント
8ch: 3points
12ch: 3points

まとめ買い
プレゼントキャンペーン
対象製品
※詳細は裏表紙をご参照ください。


ローリテンションチップ
プレゼントキャンペーン
対象製品
※詳細は裏表紙をご参照ください。

オートクレーパブルマイクロピペット


Nichipet Air[®] (マルチチャンネル)

世界最高水準の精度・再現性を実現した
最軽量級マイクロピペット「Nichipet Air」の
マルチチャンネルモデル。

■ストローク荷重 自社製品比較 (200 μ L)

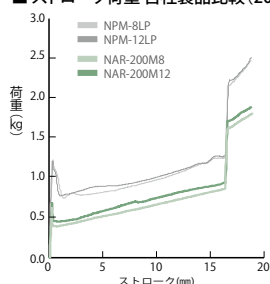

■本体重量 自社製品比較 (100 μ L)

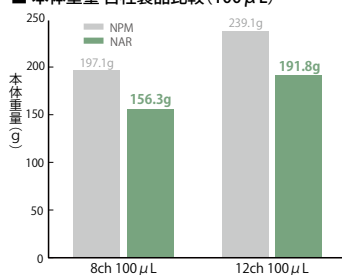

カローセルスタンド

Nichipet Air (マルチチャンネル) 4つの大きな特長 (一部抜粋)

Point 1 ピペッティング

従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。




Point 2 ボディ

ボディが細くなり操作性がアップ。耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。




Point 3 容量モデル

4箇所容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。
(シングルチャンネル: 3カ所、マルチチャンネル: 4カ所)

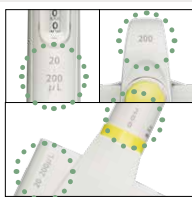

Point 4 マルチフィットノズル

スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。

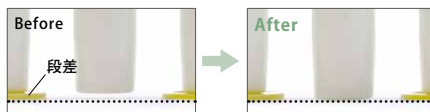

製品コード (識別カラー)	容量範囲 (μ L)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-10M8 (ピンク●)	0.5~10	$\pm 8.0^{**} \sim \pm 2.0$	$\leq 5.0^{**} \sim \leq 1.0$	110,000円 (8チャンネル)	82,500円
00-NAR-100M8 (オレンジ●)	10~100	$\pm 3.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 2.0 \sim \leq 0.3$		
00-NAR-200M8 (イエロー●)	20~200	$\pm 3.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 1.5 \sim \leq 0.3$		
00-NAR-300M8 (ホワイト●)	30~300	$\pm 3.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.3$		
00-NAR-10M12 (ピンク●)	0.5~10	$\pm 8.0^{**} \sim \pm 2.0$	$\leq 5.0^{**} \sim \leq 1.0$	120,000円 (12チャンネル)	90,000円
00-NAR-100M12 (オレンジ●)	10~100	$\pm 3.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 2.0 \sim \leq 0.3$		
00-NAR-200M12 (イエロー●)	20~200	$\pm 3.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 1.5 \sim \leq 0.3$		
00-NAR-300M12 (ホワイト●)	30~300	$\pm 3.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.3$		

※NAR-10M8、10M12の1 μ L以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT: 4,620円)。

■カローセルスタンド

製品コード	適合ピペット/収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	Nichipet Airシリーズ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、NICHIRYO Le いずれも8本収納可能。	16,500円	12,375円

※原寸大



オートクレーパブルマイクロピペット

Nichipet® EX III

国産マイクロピペットのスタンダード。
多くの研究者の手に馴染んできた
ベストセラーの最新モデル。



容量モデル毎に色分け(全8色)

NEW!

00-NPX3-200

00-NPX3-1000

ローリテンションチップ
プレゼントキャンペーン
対象製品
※詳細は裏表紙をご参照ください。

30% OFF

AC 滅菌可 UV 殺菌可

デモ機
貸出OK

ドリームバンクポイント
1 point

製品コード(識別カラー)	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格	製品コード(識別カラー)	容量範囲(μL)	容量範囲(μL)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX3-2(グレー●)	0.1~2	~±1.5*	~±0.7*	38,000円	26,600円	00-NPX3-200(イエロー●)	20~200	±2.5~±0.6	≤0.7~≤0.2	38,000円	26,600円
00-NPX3-10(ピンク●)	0.5~10	~±1.0*	~±0.4*			00-NPX3-1000(ブルー●)	100~1000	±3.0~±0.8	≤0.6~≤0.2		
00-NPX3-20(クリーム●)	2~20	±5.0~±1.0	≤1.5~≤0.3			00-NPX3-5000(グリーン●)	500~5000	±2.4~±0.6	≤0.6~≤0.15		
00-NPX3-100(オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2			00-NPX3-10000(ホワイト●)	1000~10000	±3.0~±0.6	≤0.6~≤0.15		

※NPX3-2の0.2μL未満、NPX3-10の1μL未満における系統誤差・偶然誤差はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

UV 殺菌可 カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

エルゴノミックマイクロピペット

NICHIRYO Le

デモ機
貸出OK

40% OFF

マイクロピペット用スタンド

Stand series

MAX
25% OFF

ドリームバンクポイント
1 point

83g台の超軽量ピペット。
お手軽価格の
スターターピペット。

00-NLE-200

00-NLE-1000

NEW!



マルチロータリースタンド



壁掛けスタンド

製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	0.5~10	~±1.2*	~±0.8*	19,000円	11,400円
00-NLE-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.5		
00-NLE-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NLE-200	20~200	±1.2~±0.8	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-1000	100~1000	±1.2~±0.7	≤0.8~≤0.5		

※NLE-10の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

製品名/製品コード	適合ピペット/収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
マルチロータリースタンド 00-MLT-STD3	Nichipet EX III、Nichipet Premium、 Nichipet Premium LT、Nichipet EX II、 Nichipet EX Plus II、Nichipet EX II MULTI シングル6本/マルチ3本収納可能。	11,000円	8,250円
壁掛けスタンド 00-NLE-STD	Nichipet Premium、Nichipet EX II、 Nichipet EX Plus II、NICHIRYO Le	2,500円	—

●壁掛けスタンド(00-NLE-STD)は壁等に両面テープかねじで取り付ける方式です。

Low Retention Tip

Low Retention Filter Tip

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

MAX
40%
OFF

撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。
粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。

- 液切れに優れた、透明度の高いチップ。
- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- バルクとリフィルは未滅菌、ラック入りは滅菌済にてご提供。
- 空ラックの販売はございませんので、空ラックが必要な場合は滅菌済ラック入りチップをお買い求めください。



バルク











リフィル



ラック入り

	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
フィルターなし	10 μ L	31.1mm	00-LRT-10	バルク	1,000本	未滅菌	6,000円	3,600円(3.6円)
			00-LRT-10-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		11,000円	6,600円(6.88円)
			00-LRT-10RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	10,500円	8,925円(9.3円)
	10 μ L (ロング)	45.8mm	00-LRT-10L	バルク	1,000本	未滅菌	6,000円	3,600円(3.6円)
			00-LRT-10L-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		11,000円	6,600円(6.88円)
			00-LRT-10LRB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	10,500円	8,925円(9.3円)
	200 μ L	50.8mm	00-LRT-200	バルク	1,000本	未滅菌	5,000円	3,000円(3.0円)
			00-LRT-200-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		9,000円	5,400円(5.63円)
			00-LRT-200RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	10,500円	8,925円(9.3円)
	200 μ L (ロング)	91.1mm	00-LRT-200LRB	ラック入り	96本×2ラック	滅菌済	4,400円	3,740円(19.48円)
	300 μ L	55.9mm	00-LRT-300	バルク	1,000本	未滅菌	7,500円	4,500円(4.5円)
			00-LRT-300-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		12,000円	7,200円(7.5円)
			00-LRT-300RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	11,500円	9,775円(10.18円)
	1250 μ L	90.2mm	00-LRT-1250	バルク	1,000本	未滅菌	8,000円	4,800円(4.8円)
			00-LRT-1250-RF	リフィル	96本×4段×2セット(768本)		12,000円	7,200円(9.38円)
			00-LRT-1250RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	12,500円	10,625円(11.07円)

	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
フィルターあり	10μL 	31.1mm	00-LRT-F10RB	ラック入り	96本 × 10ラック	滅菌済	17,000円	12,750円(13.28円)
	10μL (ロング) 	45.8mm	00-LRT-F10LRB					
	20μL 	50.8mm	00-LRT-F20RB					
	100μL 		00-LRT-F100RB					
	200μL 		00-LRT-F200RB					
	200μL (ロング) 	91.1mm	00-LRT-F200LRB		96本× 2ラック		8,000円	6,000円(31.25円)
	300μL 	55.9mm	00-LRT-F300RB		96本 × 10ラック		17,000円	12,750円(13.28円)
	1250μL 	90.2mm	00-LRT-F1250RB					

NichimateAqua™

スタンダードチップ

NichimateAQUA Tip

※販売終了製品「Economy Tip」相当品です。

バルク、リフィル

バルク(袋入り)とリフィル(詰替)で提供される
コストリーズナブルなスタンダードチップ。



バルク

リフィル

MAX
35%
OFF

AC
滅菌可

サンプル
提供OK

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

容量／外形	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望 小売価格	キャンペーン価格 (単価)
10μL 	31.3mm	00-AQA-N10	バルク	1,000本	未滅菌	3,500円	2,275円 (2.28円)
		00-AQA-N10-RF	リフィル	960本 (96本×10段)		6,500円	4,550円 (4.74円)
10μL (ロング) 	48.0mm	00-AQA-N10L	バルク	1,000本		3,500円	2,275円 (2.28円)
200μL 	53.0mm	00-AQA-N200	バルク	1,000本		6,000円	4,200円 (4.38円)
		00-AQA-N200-RF	リフィル	960本 (96本×5段×2)		4,000円	2,600円 (2.6円)
1000μL 	81.9mm	00-AQA-N1000	バルク	1,000本		7,500円	5,250円 (5.47円)
		00-AQA-N1000-RF	リフィル	960本 (96本×5段×2)			

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問合せください。●AQAチップとMarinチップはラックの互換性はございません。

ラック(透明PC製)

ニチメイトアクアチップ専用。
積み重ねやすいストレート形状。高い透明度のフタは取外し式。

適合チップ	カラー	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
10μL	橙	00-AQA-N10RK	5個	6,500円	3,900円
10μLロング	赤	00-AQA-N10LRK			
200μL	黄	00-AQA-N200RK			
1000μL	青	00-AQA-N1000RK			



40%
OFF

AC
滅菌可

サンプル
提供OK

NichimateAqua™

スタンダードチップ(ラック入り滅菌済み)

NichimateAqua Marine Tip NEW!

液切れの良い、リーズナブルな
スタンダードチップ。

ラック入り滅菌済みパッケージでのご提供。



10μL 10μL (ロング) 200μL 200μL (ロング) 1000μL

容量／外形	製品コード	長さ	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
10μL 	00-MRN-10RB	32mm	ラック 入り	96本 × 10ラック	電子線 滅菌済	5,500円	3,575円 (3.72円)
10μL (ロング) 	00-MRN-10LRB	46mm				7,000円	4,550円 (4.74円)
200μL 	00-MRN-200RB	51mm				6,500円	4,225円 (4.4円)
200μL (ロング) 	00-MRN-200LRB	90mm				7,500円	4,875円 (5.08円)
1000μL 	00-MRN-1000RB	88mm					

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。●AQAチップとMarinチップはラックの互換性はございません。

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

35%
OFF

NichimateAqua™

凍結保存用チューブ

NichimateAqua CryoVial

NEW!

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

28%
OFF


液体窒素の蒸気中(浸漬は不可)における
凍結保存に最適なチューブ。



カラーキャップインサート



アウター
キャップタイプ

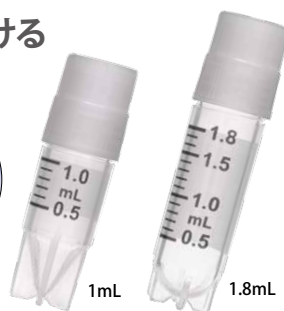

インナー
キャップタイプ



製品コード	容量 (mL)	タイプ	滅菌	材質	凍結保存環境	入数	希望小売 価格	キャンペーン価格 (単価)
00-AQA-CV-1SE	1.0	アウターキャップ (External thread)	電子線 (オートクレーブ不可)	キャップ:HDPE チューブ:PP O-リング:シリコン (O-リングはSPのみ)	液体窒素の 蒸気中 (浸漬は不可)	200本 (100本×2袋)	12,000円	8,640円(43.2円)
00-AQA-CV-2SE	1.8							
00-AQA-CV-1SP	1.0	インナーキャップ (Internal thread)				12,500円	9,000円(45円)	
00-AQA-CV-2SP	1.8							
00-AQA-CV-CC	カラーキャップインサート (数色の詰め合わせ)		なし (オートクレーブ不可)	PS		500個	6,500円	4,680円(9.36円)

●本製品は細胞懸濁液等を入れて別途プログラムフリーザー等で凍結した後に、液体窒素の蒸気中で凍結保存するための容器です。液体窒素中に浸漬することはできません。液体窒素に浸漬した場合、液体窒素が本製品の内部に侵入する場合があります。液体窒素が侵入した本製品を液体窒素保存容器から取り出すと、本製品内部に侵入した液体窒素が急激に膨張し本製品が破裂する危険性があります。本製品を液体窒素に浸漬して内容物を凍結させることは、絶対に行わないでください。●本製品は、オートクレーブ滅菌および遠心はできません。●目盛線や容量の印刷の濃さは個体差があります。

NichimateAqua™

ディスポーザブルセロロジカルピペット

Serological Pipette

滅菌済、個包装パッケージ。

DNase・RNase・パイロジェンフリー。

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

40%
OFF



製品コード	識別カラー	容量	容量精度	目盛間隔	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-SLP-1	黄●	1mL	±2%	0.01mL	ピペット: ポリスチレン フィルター: ポリエチレン および ポリエステル	300本	10,500円	6,300円(21円)
00-SLP-2	緑●	2mL		0.01mL		300本	11,500円	6,900円(23円)
00-SLP-5	青●	5mL		0.1mL		200本	10,500円	6,300円(31.5円)
00-SLP-10	橙●	10mL		0.1mL		200本	11,500円	6,900円(34.5円)
00-SLP-25	赤●	25mL		0.2mL		100本	10,500円	6,300円(63円)
00-SLP-50	黒●	50mL		0.5mL		100本	17,500円	10,500円(105円)

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管

Centrifuge Tube

遠心強度20,000×g。


キャップのシール性が高く、

耐熱・耐寒に優れる。

安心の国内製造、滅菌済。



キャップ上面はフラットな形状
書き込み可能

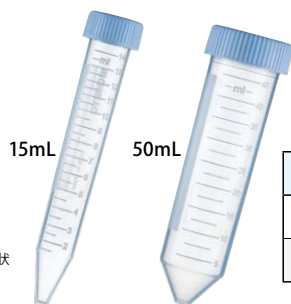

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

AC
滅菌可

サンプル
提供OK

30%
OFF

容量	製品コード	滅菌	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
15mL	00-ETS-CT-15	電子線	400本 (50本×8袋)	16,000円	11,200円 (28円)
50mL	00-ETS-CT-50		200本 (20本×10袋)	12,000円	8,400円 (42円)

NichimateAqua™

マイクロチューブ(キャップロックタイプ)

Micro Tube

ガードピンで片手操作時の

コンタミネーションリスクを低減。



AC
滅菌可

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

30%
OFF

タイプ	容量	製品コード	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
キャップ ロック	1.5mL	00-ETS-MC-15	1,000個	4,500円	3,150円 (3.15円)
	2.0mL	00-ETS-MC-20	1,000個	6,500円	4,550円 (4.55円)

手動式ピペットポンプ

Pipette Mate® eco

25% OFF

セロジカルピペットやメスピペット用の
使いやすい手動式ピペットポンプ。
電動タイプが苦手とする環境での
使用や試料(海水等)にも最適。



NEW!

上部のラバーボール①を
握って潰してからレバー②
で吸引、吐出します。
丸い突起③はピペット先端
に残った液を吐き出すプ
ローアウトボタンです。

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-PMECO	吸引吐出容量:0.1~50mL 使用可能ピペット:1~100mL セロジカルピ ペット(メスピペット)、外径φ5~8mmのバスツ ールピペット等 フィルター:φ29mm、ポアサイズ3.0μm、疎水性 PTFE 外径寸法/重量:最大外径φ57×206Hmm(突起 部含まず)、約120g 標準付属品:フィルター(内部に取付済)	9,900円	7,425円

●本製品に、オートクレーブ滅菌できる部位はありません。

ピペットコントローラ(液晶表示付き)

Pipette Mate® Slim

35% OFF

吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、
吸引速度とバッテリー残量を
液晶画面で確認可能。

デモ機
貸出OK



自立スタンド(別売)
(00-PMSLM-OP1)

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-PMSLM	使用可能ピペット:1~100mL セロジカルピペット (メスピペット)、外径φ5~8mmのバスツールピペット等 吸引/吐出:吸引速度は6段階、吐出速度は一定(ボタ ンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替) バッ テリー:リチウムイオン充電電池(取り出し不可、交換を 必要の場合は販売店にご連絡ください) 標準付属品: 壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備	56,000円	36,400円

●交換用部品:壁掛けスタンド(00-PMSLM-RP1、1,540円)、フィルター(00-PMSLM-RP2、4,620円)、充電器(00-PMSLM-RP3、6,930円)、ピペットホルダー(00-PMSLM-RP4、2,310円)、ノーズコーン(00-PMSLM-RP5、5,390円)。

■オプション:自立スタンド

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格
00-PMSLM-OP1	パネルの色がブルーのPipette Mate Slimで使用できる着脱式の自立 スタンド。	5,500円

ピペットコントローラ

Pipette Mate® NEO


35% OFF

UV耐性でクリーンベンチ内での使用にも最適。
軽量(約167g)で操作性に優れた
スタンド不要の自立型。

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

ドリームバンクポイント
1 point

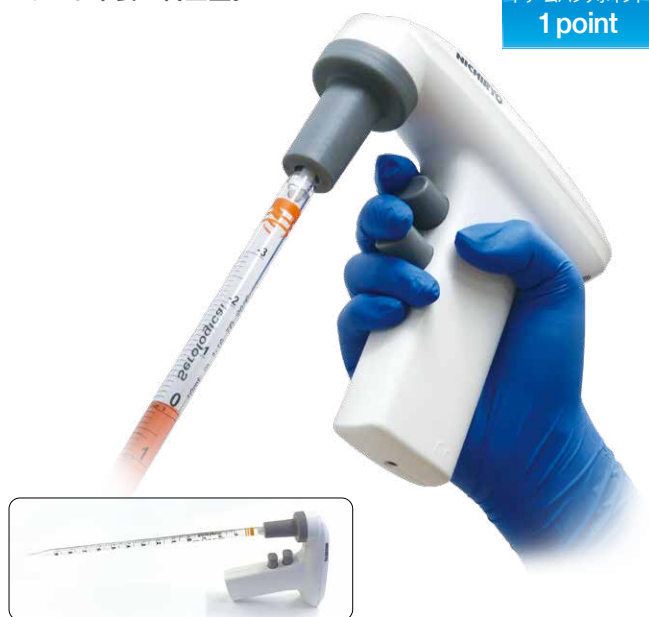

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-PMNEO	使用可能ピペット:ガラス製およびプラ スチック製(1~100mL)	59,000円	38,350円

オートクレーバブルボルトトップディスペンサー

DISPET EXII

23% OFF

各種標準試薬瓶にセット可能な
ボルトトップディスペンサー。
オートクレーブ滅菌
(121℃、20分)が可能。

AC
滅菌可

ドリームバンクポイント
1 point



【耐薬性
一覧】



製品コード	分注容量 (mL)	目盛単位 (mL)	精度 (%)	再現性 (%)	本体 ねじ口	付属 アダプタ サイズ	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-DPX2-20	0.2~2.0	0.05	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28	79,000円	60,830円
00-DPX2-50	0.5~5.0	0.10	±0.5	≤0.1		GL-32	99,000円	76,230円
00-DPX2-100	1.0~10.0	0.2	±0.5	≤0.1		GL-38	110,000円	84,700円
00-DPX2-250	2.5~25.0	0.5	±0.5	≤0.1			140,000円	107,800円
00-DPX2-500	5.0~50.0	1	±0.5	≤0.1				
00-DPX2-1000	10.0~100.0	2	±0.5	≤0.1				

小型簡易遠心機(デジタルタイマー付き)

Nichimate Flush II

タイマー運転のほか、カバー開閉で
回転ON/OFFも可能。
アダプターとローター交換で、
マイクロチューブ各種に対応。

- 回転速度は6,000rpm固定
(最大遠心力2,000×g)。
- ローター2種とアダプターで、
各種マイクロチューブに対応。
- タイマー時間はデジタル表示で、
秒と分を切替可能。



マイクロチューブ
各種に対応



デジタルタイマーを
装備



押しやすい
ロック解除レバー



25%
OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF-2	回転速度/最大遠心力: 6,000rpm固定、2,000×g ^{※1} 回転開始/停止操作: カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) ^{※2} タイマー時間設定範囲: 0~9999秒/1~9999分 ^{※3} マイクロチューブ架数: ●0.2mL: シングル×8本または8連×2本 / ●0.5mL×8本 / ●1.5mLまたは2.0mL×8本 標準付属品: 標準ローター×1個、0.2mL(8連)用ローター×1個、 チューブアダプター(0.2および0.5mL用、各8個)	55,000円	41,250円

※1. 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。 ※2. ローターが完全停止するまで、カバーを開けないでください。 ※3. 本製品は簡易遠心機のため、実際には9999秒や9999分の長時間の連続遠心を推奨するものではありません。
●販売中のシリーズ機種(Nichimate Flush Plus)とはカバーの高さが異なるため、同製品のコンバインド・ローターを本製品で使用することはできません。
●本製品は、液滴を簡単にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

小型簡易遠心機

Nichimate Flush

カバー開閉で回転ON/OFFが可能。
付属のアダプターやローター交換で
5種類のマイクロチューブに対応。



0.2mL用ローター

1.5/2.0mL用ローター

製品コード	最大回転数	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	6,000r/min (2,000×g)	●1.5/2.0mL×8本 ●0.2mL×8本(付属アダプター使用) ●0.2mL(8連)×4本(付属ローターに交換) ●0.5mL×8本(付属アダプター使用)	63,000円	50,400円



20%
OFF

デモ機
貸出OK

小型簡易遠心機(回転速度可変式)

Nichimate Flush Plus

回転速度可変式
(3,000~10,000rpm)。
タイマー運転のほか、
カバー開閉で回転ON/OFFも可能。
コンバインド・ローターで、
ローター交換不要。



タイマー時間は
秒と分を切替可能

カバーのロック解除は、軽く
レバーを押下げるだけ

コンバインド・
ローター



25%
OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF+	回転速度範囲: 3,000~10,000rpm(設定単位: 1,000rpm) ^{※1} 最大遠心力(RCF): 500~5,600×g ^{※1} 回転開始/停止操作: カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) ^{※2} タイマー時間設定範囲: 0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 使用可能容器と最大架数 ^{※3} : 0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)、シングル×16(24)本または8連×2本、 0.5mLマイクロチューブ×8(16)本、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 ^{※4} 標準付属品: コンバインド・ローター×1個(取付済)、0.2mL用チューブアダプター×8個、 0.5mL用チューブアダプター×8個	77,000円	57,750円

※1. 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間(1日に1時間、年に200日使うとして約5年)です。 ※2. カバーのロックをはずすとローターの回転停止が始まりますが、完全停止するまではカバーを開けないでください。 ※3. カッコ内の本数は、チューブアダプターを使用した場合の最大架数です。この場合の本数を同時に載せることはできません。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにてしてください。 ※4. ネジロタイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。
●遠心時は、重量バランスが偏らないようにマイクロチューブ(試料)を載せてください。 ●本製品は、液滴を簡単にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

空冷ファン付き小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath II

空冷ファンにより、使用中の温度を
低い温度に変更した際の降温時間を短縮。
超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度※。

※ブロック温度:20℃ → 100℃が15分以下

空冷ファンの効果

約21℃の室温下において、ブロック温度が
100℃から37℃に下がるまでに要する時間を計測。

00-NDB (旧製品)…約60分 00-NDB-2 (本製品)…約20分



30% OFF

デモ機
貸出OK




本体底面の
空冷ファン

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB-2	使用温度範囲※:室温+5℃~+100℃ (冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ブロック温度調節精度※: +100℃時: ≤±0.5℃、+40℃時: ≤±0.3℃ ブロック温度移行速度※: +20℃ → +100℃: ≤15min 使用環境温度範囲: +4℃~+35℃ 温度プログラム運転: 2セグメントプログラムを9個保存可能 (温度メモリー的な使用も可能) 電源 (ACアダプタ): 100-240V、1.2A	79,000円 (ブロック別売)	55,300円 (ブロック別売)

※使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。●空冷ファンは、設定温度や現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。●写真の容器は付属しません。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	21,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	21,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

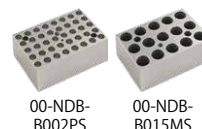

小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath Plus / Cool

超コンパクトサイズ。
小型ならではの速い温度移行速度。
サーモリッドは試料の蒸発を低減。

MAX
30% OFF

デモ機
貸出OK

サーモリッドなし(ドライバス)



サーモリッドあり(ドライバスプラス)



サーモリッドの効果

使用条件にもよりますが、
+65℃程度まで容器内の
結露をほぼ抑えることが
できます (写真はシリーズ機
種のドライバスプラスにお
いて+65℃設定時、弊社通
常ドライバスと比較)。また、
試料への環境温度の影響
を低減します。



00-NDB+
ドライバス・プラス




00-NDB-C
ドライバス・クール

製品タイプ	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
加熱・サーモリッド	00-NDB+	温度範囲: 室温+5℃~+100℃ (+20℃→+100℃ ≤15min)	89,000円 (ブロック別売)	66,750円 (ブロック別売)
加熱・冷却・サーモリッド	00-NDB-C	温度範囲: 室温-25℃~+100℃※ (+20℃→+100℃ ≤15min、+26℃→+4℃ ≤30min)	165,000円 (ブロック別売)	115,500円 (ブロック別売)

※室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で-10℃まで。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしスクールの冷却時にはOFFになります。●写真の容器は付属しません。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	21,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	21,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

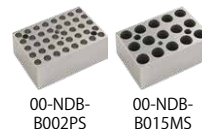

超小型スターラー／小型スターラー

Nichimate Stirrer

超小型の攪拌容量は1.5Lまで、小型の攪拌容量は3Lまで。



攪拌イメージ
容器は付属しません



25% OFF

デモ機
貸出OK

攪拌イメージ
容器は付属しません

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
超小型スターラー 00-NS-1L	回転速度(※):100~1500rpm (アナログ無段階、表示なし) 攪拌可能な最大容量(※)/許容容器サイズ:1.5L (水の場合)、外径Φ90mmまで	39,000円	29,250円
小型スターラー 00-NS-3L	回転速度(※):200~2000rpm (デジタル表示あり) 攪拌可能な最大容量(※)/許容容器サイズ:3L (水の場合)、外径Φ140mmまで		

※攪拌する液体の粘度、容器の材質や肉厚等により、仕様を満たさない場合があります。

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター

Nichimate PlateShaker

マイクロプレート2枚用の

手軽なシェーカーインキュベーター。

温度精度に優れるヒーターで上下から加温。

3mm振幅で96ウェルを確実に攪拌。



スプリングホルダー
(振とう台)



【96ウェルの
攪拌】



30% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	振とう速度/振幅:200~1200rpm、3mm 使用温度範囲※1:室温+5℃~+70℃ (設定可能範囲は0°~、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ヒーター温度調節精度※1:±0.5℃ (+37.0℃設定時:±0.3℃) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用可能容器:マイクロプレート (SBS規格) ×2枚※2 電源:AC100~240V (3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません)※3	239,000円	167,300円

※1. 容器および試料がない (環境温度以外の温度的な負荷がない) 場合の値です。なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。 ※2. 十分な攪拌ができるのは96ウェルまでです。また、試料が1枚分のみであっても、空のマイクロプレートを用いて常に2枚を取り付けてください。なお、マイクロプレートはSBS規格に準じた多くのブランドが使用可能ですが、大切な試料を損なうことがないよう、あらかじめ空のマイクロプレートを用いて着脱の感覚や固定の具合を確かめておくことをお勧め致します。 ※3. 電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。2Pコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator

ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・シーソー・間欠回転も。

容器ホルダー全種が標準付属。



4種の付属ホルダーで
下記の容器架数となり
ます (小は各2個付属)。

【動作の
様子】



20% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	振とうモード	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT	・Rotate (回転※) 5~70r/min ・Mix (間欠回転※+微震動) 5~30r/min ・Pause (間欠回転※) 5~35r/min ・Rock (シーソー) 2~10r/min ※回転は容器の取付方向によって転倒攪拌になります。	・0.5mL マイクロチューブなら24本 ・1.5/2.0mL マイクロチューブなら11本×2 ・φ12~13mm (5mLや7mL) チューブなら5本×2 ・15mL ディスポーザブル管なら5本×2 ・50mL ディスポーザブル管なら6本	139,000円	111,200円

超小型ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer-mini

手のひらサイズ、簡単操作。

50mLディスポ遠沈管(容量30mL)まで撹拌が可能。

30% OFF



デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMXM	震動速度(※)/振幅/運転モード:3000rpm 固定、4.5mm、タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量(※):50mLディスポ遠沈管 に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法及び重量:93×93×72mm、約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz	27,000円	18,900円

※撹拌する液体の粘度、容器の持ちかたや当てかた、設置場所の状態により、仕様を満たさない場合があります。滑りやすい場所や本製品のゴム足に埃が付着している場合は、50mLディスポ遠沈管を撹拌した際に本製品が滑り動く場合があります。

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer


強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。

50mL遠沈管なら液量が40mLでも確実に撹拌。

20% OFF



別売のフラットホーム

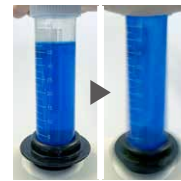

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX	震動速度:200~3,000r/min	65,000円	52,000円
00-NMX-F	フラットホーム:凹凸がついた平らで広いヘッド	15,000円	—

UV殺菌機能付きピペットスタンド

Nichimate UV Carousel

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。

28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。

マイクロピペットをクリーンな状態に保つことが可能。

30% OFF



【実験データ】



マイクロピペットは
付属しません。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NUVC-6	マイクロピペット架数: シングル6本(1000μLまで)※ 殺菌灯:UV-C、寿命約2000時間、 1回の運転:28min	110,000円	77,000円

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください。(いずれのブランドにおいても5000および10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません)。●殺菌灯は中央にあり、チャンバー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。●本製品の殺菌灯は一般的な水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

Nichimate AutoClave


マイクロピペットのノズル内部も滅菌。

滅菌から乾燥まで全自動。

100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽に。

25% OFF

デモ機
貸出OK

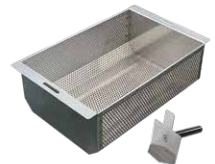

別売バスケット

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAC-1	滅菌温度:121℃(20~90分)/132℃(5~90分) 乾燥温度:約100℃(0~90分)、送風機能あり 給水:本体上面から供給、約2.8L 電源:AC100V、1.44kw(3Pコンセント)	650,000円 (バスケット別売)	487,500円 (バスケット別売)

●本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規格である「簡易」容器です。●ドアパッキンおよびエアントフィルタは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

■別売部品：バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格
00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属。 内寸:185(149)×270×99mm	60,000円

大容量超強力アスピレーター


Nichimate ASPIRATOR III

ハンドオペレーターと各種ノズル／アダプターが標準付属ですぐに使える、フットスイッチも備えた大容量超強力モデル。吸引速度は調節可能。

25% OFF

デモ機
貸出OK

ハンドオペレーターその他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。

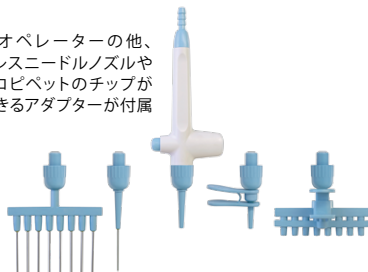

廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-3	吸引速度：～26L/min (空気における値)、真空度調節範囲：0～600mmHg (0～80kPa)、廃液容量：約2.5L、電源：AC100V、主な付属品：フットスイッチ×1、エアフィルター×1、リザーバー（キャップおよびガラス瓶）×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	145,000円	108,750円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル／チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロピペット用チップ（200～300μL）は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ＝00-NASP-3-RP2：7,400円、ボトル（ガラス瓶）＝00-NASP-3-RP3：7,400円。

強力アスピレーター（デジタルタイプ）


Nichimate ASPIRATOR II

小型ながら最大8L/minの吸引力。
吸引力をデジタルで調節可能。
廃液リザーバーにはオーバーフロー防止機構あり。

25% OFF

デモ機
貸出OK

ハンドオペレーターその他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。

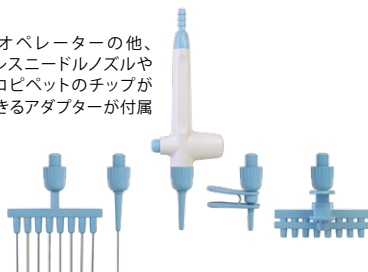

廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-2	吸引速度：～8L/min (空気における値)、真空度調節範囲：-30～-650mbar (-0.003～-0.065MPa)、廃液容量：約1000mL、主な付属品：ノズルアダプターホルダー×1、エアフィルター×1、リザーバー（キャップおよびポリ瓶）×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	125,000円	93,750円

NichimateAqua™ ゲルローディングチップ

Gel-Loading Tip

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

ラック入り滅菌済。
スラブ式電気泳動ゲルに
サンプルロードしやすいよう
デザインされたチップ。



MAX
43%
OFF

容量	製品コード	長さ	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
10μL(ラウンド)	00-GLT-10RB	51.7mm	96本 × 2ラック	9,000円	7,650円(39.84円)
10μL(フラット)	00-GLT-10FRB			20,500円	17,425円(90.76円)
200μL(ラウンド)	00-GLT-200RB	82.6mm		9,000円	7,650円(39.84円)
200μL(フラット)	00-GLT-200FRB			20,500円	17,425円(90.76円)

下記製品は滅菌期限が迫っているため、さらにお得な **43%OFF!!**

容量	製品コード	長さ	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
200μL (フラット)	00-GLT-200FRB (滅菌照射期限:2027年5月)	82.6mm	96本× 2ラック	20,500円	11,685円 (60.86円)

※数量限定。無くなり次第終了となります。

NichimateAqua™ セルセーバーチップ

Cell Saver Tip

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

ラック入り滅菌済。
先端の開口部が広いチップ。
細胞を極力傷つけないように
吸引したい場合や、高粘度液体に最適。



MAX
43%
OFF

容量	製品コード	長さ	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
200μL	00-WBT-200RB	50.0mm	96本 × 10ラック	13,500円	11,475円(11.95円)
1000μL	00-WBT-1000RB	71.1mm		19,000円	16,150円(16.82円)

下記製品は滅菌期限が迫っているため、さらにお得な **43%OFF!!**

容量	製品コード	長さ	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
1000μL	00-WBT-1000RB (滅菌照射期限:2027年7月)	71.1mm	96本× 10ラック	19,000円	10,830円 (11.28円)

※数量限定。無くなり次第終了となります。

NichimateAqua™ マクロチップ

Macro Tip

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

※マクロチップはニチリョー製品には使用できません。
適合製品についてはお問合わせください。

同スケールのメスピペットよりも
優れた容量精度。
他ブランドのピペットにも適合。
容量目盛り付き。



50%
OFF

滅菌期限が迫っているため、さらにお得な **50%OFF!!**

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
5000μL	00-MT-5000GRB (滅菌照射期限:2027年12月)	123.0mm	ラック入り 滅菌済	50本× 2ラック	7,000円	3,500円 (35円)
10000μL	00-MT-10000GRB (滅菌照射期限:2027年9月)	160.8mm	ラック入り 滅菌済	25本× 2ラック	10,000円	5,000円 (100円)

※数量限定。無くなり次第終了となります。

NichimateAqua™ リザーバー (白色PS製、透明PET製)

Reagent Reservoir

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK

(白色PS製)

(白色PS製)

RV-100S
(白色PS製)

RV-PET50S
(透明PET製)



MAX
55%
OFF

容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
10mL	00-RV-10	白色 ポリス チレン	5個包装 滅菌済	5× 40個	30,000円	24,000円(120円)
25mL	00-RV-25				33,000円	26,400円(132円)
50mL	00-RV-50					
100mL	00-RV-100		個包装 滅菌済	100個	28,000円	22,400円(224円)
10mL	00-RV-10S					
25mL	00-RV-25S					
50mL	00-RV-50S					
100mL	00-RV-100S					
50mL	00-RV-PET50S	ポリエチレン テレフタレート	個包装 滅菌済	50個	9,500円	7,600円(152円)

下記製品は滅菌期限が迫っているため、さらにお得な **55%OFF!!**

容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
100mL	00-RV-100S (滅菌照射期限:2026年9月)	白色 ポリスチレン	個包装 滅菌済	100個	28,000円	12,600円(126円)

※数量限定。無くなり次第終了となります。



在庫限りで販売終了!!



00-ETS-200SERK
(NICHIRYOロゴ入りラックのみ)



ZZ-ETS-1000LERK
(NICHIRYOロゴ無しラックのみ)



00-ETS-10UTR
(NICHIRYOロゴ入りラックチップ)



ZZ-BMT2-UTWR
(NICHIRYOロゴ無しラックチップ)



ZZ-BMT2-LGR
(NICHIRYOロゴ無しラックチップ)

対応製品	製品コード	入数	キャンペーン価格
00-AQA-N200-RF	00-ETS-200SERK	ラックのみ (5ラック)	2,200円
00-AQA-N200-RF	ZZ-ETS-200SERK		2,200円
00-AQA-N1000-RF	ZZ-ETS-1000LERK		2,400円

対応製品	製品コード	入数	キャンペーン 価格(単価)
2μL/10μL	00-ETS-10UTR	ラックチップ (96本×5ラック)	3,300円(6.88円)
20μL/100μL/200μL	00-ETS-200SER		3,000円(6.25円)
	00-ETS-1000LGR		3,600円(7.50円)
1000μL	00-ETS-1000LER ZZ-ETS-1000LER		3,400円(7.08円)
2μL/10μL	ZZ-BMT2-UTWR		2,000円(4.17円)
	ZZ-BMT2-LGR	ラックチップ (96本×10ラック)	2,000円(4.17円)
1000μL	00-BMT2-LGR		5,000円(5.21円)

— Nichipet EXII クリアランス SALE!! —

在庫限り数量限定!!

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EXII

ドリームバンクポイント 1 point

AC 滅菌可

UV 殺菌可

デモ機 貸出OK

63% OFF

多くの方々の手に馴染んできた
国産オートクレーバブルマイクロピペットの
スタンダードモデル。

Nichipet EXII 4つの大きな特長

Point 1 ガラス製のカウンター窓

UVで劣化しないガラス製カウンター窓。クリーンベンチ内での使用にも安心。



Point 2 ロック機能

ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。



Point 3 ボディ

耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブも可能な堅牢ボディ。



Point 4 エジェクタパイプ

エジェクタパイプをネジ止め式にすることで意図しない脱落を防止、着脱も容易。また、エジェクタパイプを金属ではなく樹脂製にすることで耐薬性を向上。



製品コード	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX2-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3	37,000円	13,770円

※ NPX2-2の0.2 μL未満、NPX2-10の1 μL未満における系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

UV 殺菌可

カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) に影響はありません。



※ 原寸大

ご注文方法

[専門FAX注文書]

本キャンペーン対象製品のご注文は**専門FAX注文書**にて承ります

弊社ホームページTOP画面に掲載している**キャンペーンバナー**、**右のQRコード**、
または、**下記URLより注文書をダウンロード**の上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。



キャンペーンサイトURL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2026_0113.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。



プレゼントキャンペーンpart1

ラックチッププレゼント キャンペーン!!

Nichipet EX Plus IIをご購入いただいた方に、
ラックチップ※(96本×5ラック)をプレゼントいたします!

※ZZ-ETS-1000LGR(容量:1000μL)

※数量限定・無くなり次第終了となります。



ZZ-BMT2-LGR
(NICHIRYOロゴ無しラックチップ)



プレゼントキャンペーンpart2

まとめ買いプレゼント キャンペーン!!

対象製品(NARシリーズ)を3本ご購入いただくことに、
ピペットスタンド(00-NAR-STD 16,500円相当)を1台
プレゼントいたします!

※ラックチッププレゼントキャンペーンと併用可能です。

※プレゼント品は2026年4月以降のお渡しになる可能性がございます。



カローセルスタンド
(00-NAR-STD)

まとめ買いプレゼント対象製品 (容量識別色)	容量範囲 (μL)	目盛単位 (μL)
00-NAR-2(グレー●)	0.1~2	0.002
00-NAR-10(ピンク●)	0.5~10	0.01
00-NAR-20(クリーム●)	2~20	0.02
00-NAR-100(オレンジ●)	10~100	0.1
00-NAR-200(イエロー●)	20~200	0.2
00-NAR-1000(ブルー●)	100~1000	1
00-NAR-5000(グリーン●)	500~5000	5
00-NAR-10000(ホワイト●)	1000~10000	10

まとめ買いプレゼント対象製品 (容量識別色)	チャンネル 数	容量範囲 (μL)	目盛単位 (μL)
00-NAR-10M8(ピンク●)	8	0.01	0.01
00-NAR-100M8(オレンジ●)		0.1	0.1
00-NAR-200M8(イエロー●)		0.2	0.2
00-NAR-300M8(ホワイト●)		0.5	0.5
00-NAR-10M12(ピンク●)	12	0.01	0.01
00-NAR-100M12(オレンジ●)		0.1	0.1
00-NAR-200M12(イエロー●)		0.2	0.2
00-NAR-300M12(ホワイト●)		0.5	0.5

プレゼント品詳細

製品コード	00-NAR-STD
適合ピペット/ 収納本数	Nichipet Airシリーズ、 Nichipet Premium、 Nichipet Premium LT、 NICHIRYO Le いずれも8本収納可能。



プレゼントキャンペーンpart3

ローリテンションチップ プレゼントキャンペーン!!

対象製品(NARシリーズ、NPX3)をご購入いただいた方に、
ローリテンションチップ(リフィルとラックチップを1ラック)をプレゼントいたします!

※NAR-5000、10000/NPX3-5000、10000は対象外です。

※LRT-200-RFが無くなった場合はLRT-300-RFをプレゼントに切替えます。

※ラック入りチップは2026年4月以降のお渡しになる可能性がございます。

※在庫が無くなり次第終了となります。

製品コード	製品名	チッププレゼント対象製品
00-LRT-10-RF+対象ラックチップ	Low Retention Tip	NAR-2/NPX3-2/NAR-10M8、10M12
00-LRT-10L-RF+対象ラックチップ		NAR-10/NPX3-10
00-LRT-200-RF+対象ラックチップ		NAR-20、100、200/NPX3-20、100、200/NAR-100M8、200M8、100M12、200M12
00-LRT-300-RF+対象ラックチップ		NAR-300M8、300M12
00-LRT-1250-RF+対象ラックチップ		NAR-1000/NPX3-1000



リフィル



ラック入り

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。●表示価格は消費税を含みません。●"Nichipet Air"および"ニチベットエアー"、"Nichimate"および"ニチメイト"、"Pipette Mate"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。●本製品の「箱」は輸送時の保護用のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。

